
HOGGI®



CE

SUPRA 2.0 Kullanım Kılavuzu

Tr

1	Model Tanımı ve Temel Ekipman	3
1.1	İsim plakası ve Model tanımı	3
1.2	Temel Donanım	4
1.3	Çevre Koşulları	4
2	Genel Bilgiler	5
2.1	Önsöz	5
2.1	Kullanım amacı	5
2.2	Uygunluk Beyanı	5
2.3	Koşullar Garanti	6
2.4	Servis ve Onarımlar	6
2.5	Ciddi olaylar hakkında bilgilendirme yükümlülüğü	6
2.6	Ürün güvenliği/ Ürün geri Çağırımları	6
3	Güvenlik Talimatları	7
3.1	Sembollerin anlamı	7
3.2	Genel güvenlik bilgileri	7- 10
4	Teslimat ve kullanıma hazır hale getirme	11
5	Ayar ve uyarılama seçenekleri	16
5.1	HOGGİ hafif fren	16
5.2	Koltuk genişliği	16
5.3	Koltuk yüksekliği, koltuk derinliği, oturma açısı	16
5.4	Kamber	17
5.5	Sırt Yüksekliği	17
5.6	Sırt açısı	17
5.7	Sırt açısı (açısı ayarlanabilir sırtlı)	17
5.8	Faaliyet derecesi	18
5.9	Devrilme önleyici cihaz	18
5.10	Tahrik tekerleklerini çıkarma	19
5.11	Pnömatik lastikler/ PU lastikler	19
5.12	Jantlar	19
6	Aksesuar	20
6.1	Bacak uzunluğu	20
6.2	Kucak kemeri	21
7	Taşıma	21
7.1	Bagajda	21
7.2	SUPRA 2.0 'ın Engelli araçlarda ulaşım için kullanımı	21
7.3	Genel	21
7.4	Bir tekerlekli sandalye güvenliğini Engelli aracında sağlamak	21
7.5	Tekerlekli sandalye yolcusunu emniyetini sağlamak	23
7.6	Biniş, iniş	25
7.7	Merdivenleri veya benzeri merdivenleri aşmak için eğitim koruması	25
8	Depolama	26
9	Geri dönüşüm ve bertaraf	26
10	Bakım, Bakım & Servis Ömrü	27
11	Teknik Özellikler	28

1 Model Tanımı

1.1 Tip plakası üzerinden model tanımlama

(SUPRA 2.0 tipi plaka aks Borusuna yapıştırılmıştır)

 328X-00SB-032 SUPRA 2.0 Aktivrollstuhl HOGGI GmbH Eulerstraße 27 D-56235 Ransbach-Baumbach Made in Germany	 	 2020XXXX SN	Makale SB=Koltuk genişliği / XXX=renk kodu Seri numarası CE işareti
 328X-00SB-032 SUPRA 2.0 Aktivrollstuhl HOGGI GmbH Eulerstraße 27 D-56235 Ransbach-Baumbach Made in Germany	 	 2020XXXX SN	Tür belirtme / ürün adı Maksimum kullanıcı ağırlığı / maksimum yük
 328X-00SB-032 SUPRA 2.0 Aktivrollstuhl HOGGI GmbH Eulerstraße 27 D-56235 Ransbach-Baumbach Made in Germany	 	 2020XXXX SN	Üretici Üretim yılının yeri

1.2 Temel

Alüminyum konstrüksiyonlu Şaseli aktif Tekerlekli Sandalye (toz kaplı; koltuk derinliğinde büyüyen)

3 Boy seçenekli:

Boyut 1: 2cm artışlı 24-34cm, Koltuk Derinliği 19-34 cm

Boyut 2: Koltuk Genişliği 28-38cm 2cm artışlarla, Koltuk Derinliği 20-39 cm

Boyut 3: Koltuk Genişliği 28-38cm 2cm artışlarla, Koltuk Derinliği 25-44 cm

Jantlı Tekerler ve Sökülebilir Quick Release Dingil

Giysi koruma yan parçaları düz

Tekerlek açısı isteğe bağlı olarak 3°, 6° veya 9°

Sırt açısı: 70° ila 105° ayarlanabilir

Ayarlanabilir arka Kapak

Ön koltuk yükseklikleri: 38 cm ila 51 cm

Koltuk açısı: 0° ila yaklaşık 10°

Diğer koltuk genişliklerine dönüştürülebilir

Ayak dayama: Standart

Taşıma kapasitesi: 60 kg boyut1, 75 kg boyut 2, 75 kg boyut 3

1.3 Ortam

Sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörler tekerlekli sandalyeye zarar verebilir. Üretici tavsiyesi ortam sıcaklıklarında, **SUPRA 2.0'i**

-20°C ve +40°C ve nem %5 ila %100 kullanımıdır.

Dikkat: Uzun süre güneşte duruyorsanız, tekerlekli sandalyenin bazı bölümleri ısınabilir. Emin olun!

2 Genel bilgiler

2.1 Önsöz

SUPRA 2.0'i seçtiniz ve firmamızdan yüksek kaliteli bir ürün aldınız. Bu ürünü uzun bir süre için zevk sağlamak için ve günlük yaşam kolaylaştırmak için yardımcı olur, bu kılavuzu ile size sunacak.

Size doğru ve kolay kullanımı ve gerekli bakım ve bakımı gösterir. Çalışma hatalarından kaynaklanan hasarları önlemek ve en iyi kullanıma izin vermek için lütfen aşağıdaki talimatları veya talimatları dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen satıcınıza başvurun. Kolay kullanım lı olmasını diler, ürünümüzün beklentilerinizi karşılamasını dileriz.

Bu kılavuzda açıklanan sürümde teknik değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tekerlekli sandalyeyi ilk kez kullanmadan önce, kullanıcı ve yardımcı personel tekerlekli sandalyenin güvenli kullanımını sağlamak için kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

2.2 Amaç

SUPRA 2.0 iç ve dış mekân kullanımı için kullanılabilir.

Engelli ve engelli çocuk ve ergenlere hizmet vermektedir.

"Teknik veriler" sayfa 28) eşlik eden bir kişi tarafından kendi kendine taşıma ve / veya üçüncü taraf taşıma durumunda bireysel kullanım için.

Tekerlekli sandalye bakımı tıbbi olarak belirtilebilir:

- Felç (parapleji/tetrapleji veya parezis)
- Organ eksikliği
- İntol/Spastik Serebral Palsi
- Spina Bifida
- Kas ve sinir hastalıkları
- Osteogenezis Imperfecta
- Çocuk felci

SUPRA 2.0 genellikle yeniden kullanım için uygundur.

Yeniden kullanım için, söz konusu ürünün önce iyice temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir. Ürün daha sonra durum, aşınma ve hasar için yetkili bir profesyonel tarafından kontrol edilmelidir. Tüm yıpranmış ve hasarlı parçalar ve kullanıcı için uygun olmayan/uygun olmayan bileşenler değiştirilmelidir. Bazı bileşenler, sürücü tekerlekleri, direksiyon veya sürgülü torklar gibi yeniden kullanılabilir. Bir hizmet planı, gerekli araçlar hakkında ayrıntılı bilgi ve bilgi servis kılavuzunda bulunabilir.

2.3 Uygunluk beyanı

Hoggi GmbH, üretici olarak, **SUPRA 2.0** oda tabanının AB Parlamentosu ve Konsey'in 2017/745 sayılı Tüzüğüne Ek I'de belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder. Uygulanabilir uyum standartları uygulanmıştır. **SUPRA 2.0**, ISO 7176-8, DIN EN ISO 12182 ve DIN EN ISO 12183 gerekliliklerini karşılamaktadır.

24 Garanti koşulları

Garanti, yalnızca ürünün belirtilen koşullar altında ve amaçlanan amaçlar için kullanılması durumunda kabul edilebilir. Üretici, üretici tarafından onaylanmamış bileşenlerin ve yedek parçaların neden olduğu hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Ayrıca bakınız **www.hoggi.de** Şartlar ve www.hoggi.com.tr.

25 Servis ve onarımlar

SUPRA 2.0'daki servis ve onarımlar sadece uzman perakendeciler tarafından yapılabilir. Herhangi bir sorununuz varsa, satıcınıza başvurun.

Onarımlar için, sadece orijinal yedek parça alacaksınız. Yedek parça ve yedek üniteleri ürünün ömrü boyunca mevcuttur, ancak bu serideki son ürünün satışından sadece 2 yıl sonra.

Tekerlekli sandalye ilk kullanıcı için müşterinin isteğine göre yapılır. Bu nedenle, ilk yapılandırmada yedek tekerlekli sandalye bulunmamaktadır. Doğru yedek parça teslimatını sağlamak için seri No. Tekerlekli sandalyen.

Bölgenizde uzman bir bayi bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bize şu: info@hoggi.com.tr

26 Ciddi olaylar hakkında bilgi verme yükümlülüğü

Ürünle bağlantılı olarak meydana gelen ciddi olaylar üreticiye, uzman satıcıya ve yetkili makama bildirilir.

27 Ürün güvenliği / ürün geri çağırımları

Ürün güvenliği ve ürün geri çağırımları hakkında daha fazla bilgiyi uzman satıcılardan veya doğrudan www.hoggi.com.tr üreticide **bulabilirsiniz**.

Kurulum, bakım ve onarım için aşağıdaki araçlar gereklidir:



- Alyn anahtar boyutu: 3 mm, 4 mm, 5 Mm
- Boyut soketleri: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 17 Mm
- Anahtar boyutları: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 19 mm, 22 mm, 24 Mm
- Düz Torna vida
- Sivri Pense
- Tork anahtarı



Diğer SUPRA 2.0 belgeleri:

- Servis Talimatları
- Yedek parçalar

3 Güvenlik

3.1 Sembolizmin anlamı

**Dikkat!**

Olası kaza ve yaralanma tehlikeleri veya teknik hasarlar için uyarılar.

**Değil!**

Cihaz çalışması için.

**Not!**

Servis personeli için.

**Dikkat!**

İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun.

3.2 Genel güvenlik talimatları



İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun!

Kullanmadan önce, önce ürünün kullanımı ve işlevi hakkında bilgi edinin ve önce işleme alıştırmayı yapın.

Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu talimatlara uymazsanız çocuğunuzun güvenliği tehlikeye atılabilir. Ancak, tüm olası koşullar ve öngörülemeyen durumlar ele alınamaz. Akıl, dikkat ve ihtiyatlılık bu ürünün getiremeyeceği faktörlerdir; çocukların tekerlekli sandalyesini kullanan veya eşlik eden kişi tarafından sağlanır. Tekerlekli sandalye ve ilgili aksesuarları kullanan kişi tüm talimatları anlamalıdır. Tekerlekli sandalyeye ilgili aksesuarları kullanan herkese tekerlekli sandalyenin çalışmasını açıklamamız gerekir.

Talimatlar anlaşılabilir ise ve daha fazla açıklama gerekiyorsa veya başka sorularınız varsa, lütfen **HOGGI** bayinizle irtibata geçin.

İlk olarak, düz, şeffaf arazi üzerinde çocukla tekerlekli sandalye sürme uygulama.

Çocukla birlikte ağır nokta kaymalarının tekerlekli sandalyenin davranışı üzerindeki etkilerini keşfedin, örneğin düşme pistleri, eğimler, tüm eğilimler veya engellerin üstesinden gelirken, ancak sadece bir yardımcının güvenli desteğiyle.

Devrilme korumasının kullanımı eğitimsiz tekerlekli sandalye kullanıcıları için şiddetle tavsiye edilir.



Çocuğunuza her zaman tekerlekli sandalyede bağla.



Biz tekerlekli sandalye kullanarak tipik kullanım ötesinde tehlikeli olabilir işaret etmek istiyorum. Bu ürün koşu, yarış, paten veya benzeri için uygun değildir. Direksiyon ön

tekerlekler yüksek hızlarda çırpınma başlayabilir, hangi ani bir durdurmak ve tekerlekli sandalye üzerinde rulo yol açabilir. Bu nedenle, tekerlekli sandalyeyi sadece normal yürüme hızında itin. Hiçbir koşulda iterken tekerlekli sandalyeyi serbest bırakmak veya püskürtmek caiz değildir.



Ürün sadece düz ve düz yüzeylerde kullanılabilir.



Tekerlekli sandalyenizi sadece beklendiği gibi kullanın. Örneğin, bir engel (sahne, kaldırım, mobilya parçası ...) karşı sürüş kaçının.



Sadece arka tekerlekler üzerinde eğimli şasi ile basamaklar ve zemin uyuyanlar üzerinde sürücü (yukarı çeki- geriye doğru çekerek, aşağı doğru- yavaş yavaş ileri küçümseyen). Merdivenlerin aşması sadece yardımcı bir kişi tarafından mümkünse, muhtemelen monte edilmiş ve yanlış ayarlanmış eğim koruması ağır düşmelere yol açabilir. Taşıma sırasında basamaklarda kurulamayacak şekilde eğim korumasını önceden ayarlayın. Daha sonra eğim korumasını tekrar doğru şekilde ayarlayın.



Merdivenler sadece eşlik eden kişilerin yardımıyla tırmanılabilir. Rampa, asansör veya asansör gibi ekipmanlar bu amaçla mevcutsa, bunlar kullanılmalıdır. Muhtemelen monte edilmiş eğim korumasının tehlikeli bölgenin dışında olduğundan emin olun. Rampa, vb. tesislerin yokluğunda, iki yardımcı nın taşınması ile engelin aşılması gerekir. Kaldırma için tekerlekli sandalyeyi sadece sıkıca kaynaklı veya sıkıca vidalanmış çerçeve parçalarına (direksiyon simidi üzerindeki yan çerçeveye ve sürgülü kola) takın. Arka taban veya arka braket sabittir- alternatif olarak kapalı frenler bile kavrama lastikleri kullanabilirsiniz).



Eğimler, eğimler ve rampalarda engeller üzerinde sürüş yaparken her zaman yolcunun gövdesini çok ileriye doğru yatırın. Yollara kontrolsüz, ancak daha düşük hızda inme. Ağırlık merkezini değiştirerek direksiyonun rölöf direksiyon unamı, direksiyon unamının çarpınmalarına yol açabilir.



Tekerlekli sandalye prensipte sadece yatay, düz yüzeylere yerleştirilmelidir. Bir eğim üzerine yerleştirmek kaçınılmazsa, lütfen koltuğun dik bir konuma yerleştirildiğinden emin olun. Eğimlerde, sırt dayama nın kabartma pozisyonunda geriye doğru eğilme riski olabilir.



Tekerlekli sandalyeden ayrılmadan önce veya uçağa binmeden ve inmeden önce her zaman frenleri kapatın.



- Ayak tahtaları uçağa binmek ve karaya çıkmak için kullanılamaz.
- Sadece ayakkabı ile ayak tahtası kullanın.



Ayak tahtasının ayarına ve tekerlekli sandalyenin geometriye bağlı olarak, ayak tahtasının üzerine binerken öne doğru eğilme riski olabilir. Tekerlekli sandalye güvenli bir asistan ile çocuk ile ilk girişleri uygulama emin olun. Tekerlekli sandalyeye girmek için ayak tahtası kullanılmamalıdır. Girmeden önce ayak tahtasını katlayın.



Park frenlerinin genel kullanımı ve etkinliği hava basıncına bağlıdır. Düzgün şişirilmiş tekerlekler ile, tekerlekli sandalye çok daha hafif olabilir. Ve daha iyi manevra. Yolculuğunuza başlamadan önce lastiklerin doğru hava basıncına sahip olduğundan emin olun. Doğru hava basıncı tekerlek kapağına basılır, ancak tahrik tekerlekleri için en az 6 bar (600 kPa) olmalıdır.



Lastiklerde hareket eden tüm frenler servis freni olarak hizmet vermez, sadece park freni olarak tasarlanmıştır. Park frenleri fren sürüş freni olarak kullanılmayabilir. Tekerlekli sandalyenin aniden durması aşırı durumlarda düşmeye yol açabilir.



Ambalajın çocuklardan uzak tutulduğundan emin olun. Plastik ambalaj kullanırken boğulma riski vardır.



Bertaraf: Ürün ambalajı ve tüm metal, alüminyum ve plastik parçalar geri dönüştürülebilir meblağ için kullanılabilir. Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Lütfen yerel atık yönetimi için yerel atık yönetimi şirketinden isteyin.



Ambalaj hasarlıysa ürünün durumunu kontrol edin.



Çocuğunuzu asla çocuklar ve ergenler için tekerlekli sandalyede yalnız bırakmayın. Kemerlenmiş ile sabitlenmiş ve frenler tespit edilebilse bile.



Kullanıcı daha iyi görülebilmek Hedef Görülen için karanlıkta mümkün olduğunca parlak giysiler veya reflektörlü giysiler giymelidir. Ol, ol. Rağmen bu, Reflektörler rağmen, aynı zamanda Etkin aydınlatma uygulaması öneririz. Aydınlatma.



Kısa dingil mesafesi ve arka en arka konuma monte edilmiş (aktif ayarlama) ve elverişsiz duruş gibi ekstrem ortamlarda, tekerlekli sandalye zaten düz bir yüzeye eğilebilir. Eğim korumasını etkinleştirmek zorunludur.



Yokuş yukarı giderken, statik stabilite 10° eğimin altında olabilir. Ağır ceplerin bağlanması veya sürgülü braket veya sürgülü tutamaklara benzer bir şekilde kararlılığı da olumsuz etkileyebilir. Eğim korumasını etkinleştirmek zorunludur.



Üst düzey ayarlar eğitimli bir sürücü gerektirir. Eğim korumasını etkinleştirmek zorunludur.



Eğim koruması hiçbir koşulda transit silindirlerin işlevini üstlenmemelidir, örneğin tekerlekli sandalyedeki bir kişiyi sürücü tekerlekleri çıkarıldığında taşımak için. Yüklenden önce eğim korumasının etkinleştirildiğinden emin olun. Eğim korumasının sabit koltuğu kullanıcı veya beraberindeki kişi tarafından kontrol



Tekerlekli sandalyenin maksimum kullanıcı ağırlığı / maksimum yükü: 60 kg (boyut 1), 75 kg (boyut 2 ve boyut 3).



Tüm aksesuarlar ve ekler kalan yükleme kapasitesini azaltır.



Dikkat!
Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli bir taşıma aracında sürüş sırasında araca ve ilgili emniyet sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır. Bu, bir kaza durumunda yolcuları en iyi şekilde korumanın tek yoludur.
SUPRA 2.0 engelli ulaşım araçlarında koltuk olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır.



Aşırı sıcaklıklarda dikkat. **SUPRA 2.0** oda tabanının çerçeve parçaları güneş ışığı veya radyatör nedeniyle güçlü bir şekilde ısınabilir. Aşırı soğukta hipotermi riski vardır. **SUPRA 2.0** saunada kullanım için uygun değildir.
Kavrama halkaları, hızlı sürüşten fren yaparken veya daha uzun mesafelerde parmakları hafifçe ısıtır. Kullanıcı kavrama artırmak ve ısıtma, hipotermi ve kir parmakları korumak açık sürüşler için eldiven kullanmalısınız. Hassas ciltler için, bisiklet (deri yan astar ile asla ama yün eldiven) olarak eldiven kullanmanızı öneririz.



Sürücü tekerleğindeki eklenti akslarının her zaman doğru ayarlandığından emin olun. Düşmeye basıldığında, sürücü tekerleği kaldırılmamalıdır.



Ne koltuk ne de arka yükseklik aşılabılır.



Koltuk kabuklarının montajı sadece yapıcı olarak önceden belirlenmiş koltuk içindedir. Bu yeni kombinasyonun üreticisi devreye almadan önce devrilme kararlılığını ve maksimum yüke uygunluğu kontrol etmelidir. Koltuk ve arka plakaları kullanırken, basınç noktalarından kaçınmak için her zaman yastıklı koltuk minderleri kullanın!



Sıkma alanlarına müdahale etmekten kaçının.
Aşağıdaki derlemeleri bağlama riski vardır:
- Fren kolu (entegre fren sistemi ile tekerlek kapağı kullanırken)
- Fren kolu ve tahrik tekerleği arasında



Kaldırma için, tekerlekli sandalyeyi sadece sıkıca kaynaklanmış veya sıkıca vidalanmış çerçeve parçaları (direksiyon simidi üzerindeki yan çerçevede ve arka tabansabitlenmiş sürgülü şaftlarda- alternatif olarak, kapalı frenlerde bile kavrama lastiklerini kullanabilirsiniz). Kullanın).



HOGGI koltuk minderi (Trevira CS) ve kontur koltuk minderi (Trevira CS) yanı sıra **HOGGI** naylon arka kapak ve naylon koltuk kaplama standartları EN 1021-1 ve EN 1021-2 göre alev geciktirici vardır.



Görme engelli kişi veya bilişsel bozukluğu olan kişiler bilgi materyaline sahip olmalı ve yardımcı kişilerin kullanım kılavuzu yüksek sesle okumalıdır veya elektronik okuma yardımcılarını kullanabilir. Tüm belgeler, Download Center'da www.hoggi.com.tr altında PDF dosyası olarak mevcuttur. Buna ek olarak, ürün videoları ve ürün fotoğraf galerileri online olarak mevcuttur!



Tüm ayarlama çalışmalarından sonra, daha önce gevşetilmiş parçaları tekrar sıkıca sıkın.



Her zaman (engelli taşıma aracı) taşıma sırasında, kemer başına çekme kuvveti (max.10 kg) aşılmamalıdır, aksi takdirde tekerlekli sandalye nin çerçevesine zarar oluşabilir emin olun.



Ürün güvenliği veya ürün geri çağırılmaları ile ilgili bilgiler ve tüm iletişim bilgileri www.hoggi.com.tr adresindeki web sitemizde **bulunabilir**.



4 Teslimat ve imalatı Kullanılabilir -lik

SUPRA 2.0'iniz tamamen önceden monte edilmiştir ve sökülmüş tahrik tekerlekleri ve gerekirse demonte eğim koruması ile teslim edilir.

Karton teslim: 730 mm (L) x 630 mm (W) x 630 mm (H)

Ambalaj hasarlıysa ürünün durumunu kontrol edin.



Taşıma sigortalarını ve ambalajlarını dikkatlice çıkarın.

Orijinal ambalajında aşağıdaki bileşenleri bulacaksınız:

- Önceden monte edilmiş sürgülü saplı tekerlekli sandalye
- Tahrik tekerlekleri ve plug-in akslar monte edilmemiş
- Direksiyon çatallarında önceden monte edilmiş direksiyon simidi
- Siparişe bağlı olarak diğer aksesuarlar
(Bu uzman satıcı tarafından tekerlekli sandalyeye takılmalıdır)
- Talimatlar ve gerekirse araçlar



Tekerlekli sandalyeyi kullanıma hazır hale getirmek için lütfen aşağıdaki gibi devam edin:

- Gösterildiği gibi baş üzerindeki aksları kavrayın ve serbest bırakma düğmesine basın.
- Şimdi serbest bırakma düğmesine basıldığında sürücü tekerlekleri yatakları üzerinden güç sürücü aksları takın.



- Tekerlekli sandalyeyi ön tekerleklere yerleştirin ve tekerlekli sandalyeyi arka bara kaldırın.
- Daha sonra her iki sürücü tekerleğini de soketlere aks ile takın. Bunu yapmak için, sürücü tekerleğinin bezinin yanındaki kolları tutun ve başparmağınızla thru aksın serbest bırakma düğmesine basın. Daha sonra sadece sürücü tekerleği ekleyebilirsiniz.
- Aksın kayıt yakına güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun!



Dikkat!

Aksların güvenli bir şekilde yerinde kilitli olup olmadığını her sürücü tekerleğinde bir ile kontrol edin.



Tekerlekli sandalyenizde **eğim koruması varsa**, taşıma için katlanabilir.

- Tekerlekli sandalyenin arkasında durun ve eğim korumasını gösterildiği gibi ayağınızın ucuyla aşağı doğru hareket ettirin.

- Gösterildiği gibi, ayağın ucuyla eğim korumasını aktif konuma getirin.

Eğim koruması akustik olarak sesli olarak kilitlendiğinde etkin konuma ulaşılır.



SUPRA 2.0 ayrıca iki eğim koruma ünitesi ile donatılabilir.

Şekil, "etkin" konumda bir eğim koruması gösterir.



Eğim koruma borusunun uzunluğu, eğim koruma tutucusunda üç pozisyonda seçilebilir.

Eğim koruması, eğim koruma tüpünün ucundaki silindirin tahrik tekerleğinin yarıçapının ötesine bakacak şekilde ayarlanır ve yerden yaklaşık 2-3 cm yukarıda durur.



Devrilme önleyici ve dönme hareketi:

- Tekerlekli sandalyenin arkasında durun ve eğim korumasını gösterildiği gibi ayağınızın ucuyla aşağı doğru hareket ettirin.
- Ayağın ucuyla eğim korumasını etkin olmayan konuma doğru çevirin.

Eğim koruması akustik olarak sesli olarak kilitlendiğinde etkin olmayan konuma ulaşılır.



Şekil, "etkin olmayan" konumda bir eğim koruması gösterir.





SUPRA 2.0'ınız açılabilir ayarlanabilir sırt ile donatılmışsa, ayarlanabilir sırt saçı taşıma için katlanabilir.



- Gösterildiği gibi, bir elinizle tetik halatı çekin ve diğer elinizle geri konstrüksiyonu geriye doğru hareket ettirin.



- Her iki cıvata akustik akustik istenilen arka açı konumuna yapışmasını bekleyin.



SUPRA 2.0 HOGGI koltuk ve arka minderler ile donatılmış ise, minderler eklemek için aşağıdaki gibi devam edin:

- Gerekirse, arka konstrüksiyona zaten bağlı olan Cırt cırt şeritleri kontrol edin.



- Gerekirse, zaten koltuk bağlı Velcro şeritler kontrol edin.

- Koltuk minderini koltuğa ve önünüzde yapıştırılmış olan Cırt cırt şeritlere yerleştirin.
- Koltuk minderine ve Cırt cırt lı şeritte basın.



- Gösterildiği gibi, koltuk minderini (arkadaki) Velcro çizgili koltuğun altına takın.



- Arka yastığı gösterildiği gibi yerleştirin.



- Önceden yüklenmiş Velcro'nun üzerine arka yastığı sıkıca bastırın.



SUPRA 2.0'iniz kayar terimlerle donatılmışsa, taşıma için en düşük konumda olabilirler.

- Cıvatayı gösterildiği gibi açın.





- Diğer elinizi sürgülü tutamacı istenilen yüksekliğe taşımak için kullanın.
- Cıvatayı tekrar kapatın.
- Karşı tarafta da aynısını yap.



Tekerlekli sandalye müşterinin siparişine göre inşa edilmiş ve **alt bacak uzunluğu** müşterinin isteklerine göre ayrı ayrı önceden belirlenmiştir.



- Gösterildiği gibi her iki taraftaki bağlantı parçaları gevşetin.



- Ayak tahtasını istenilen konuma getirin.



- Sonra tekrar sıkıca her iki cıvata sıkın.



Asla içeri girip çıkmak için ayak tahtasını kullanmayın!

5 Ayarlama ve ayarlama seçenekleri

5.1 Fren *HOGGI* ışık

- Freni kapatmak için, işaret parmağınızla fren kolu geriye doğru itin.



Dikkat!
Lastiklerde hareket eden tüm frenler servis freni olarak hizmet vermez, sadece sabit fren olarak tasarlanmıştır. Park frenleri fren sürüş freni olarak kullanılmayabilir. Tekerlekli sandalyenin aniden durması aşırı durumlarda düşüşe yol açabilir.



- HOGGI** Hafif frenini açmak için, fren koluna gösterildiği gibi ileri basın.



Dikkat!
Park frenlerinin etkinliği hava basıncına bağlıdır. Yolculuğa başlamadan önce hava basıncının doğru olduğundan emin olun. Doğru hava basıncı tekerlek kapağına basılır ve tahrik tekerlekleri en az 6 bar (600 kPa) vardır.



Fotoğraf kapalı bir **HOGGI** hafif fren gösterir.

5.2 Koltuk genişliği

Koltuk genişliği uzman bayi tarafından 2 cm adımda ayarlanabilir.



5.3 Koltuk yüksekliği, koltuk derinliği, koltuk açısı

Koltuk yüksekliği, koltuk derinliği ve koltuk açısı yan panellerde ayarlanır.

Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir. Koltuk yüksekliği, koltuk derinliği ve siz açısının uzman satıcı tarafından dönüştürülmesi mümkündür.





54 Tekerlek açısı

SUPRA 2.0 3°, 6° veya 9°'lık bir **tekerlek açısı** ile donatılabilir.

Fotoğraf tekerlek düşme adaptörü gösterir.

Fotoğraf hala çekiliyor

55 Arka yükseklik

- İşaretli vida bağlantısı (her iki tarafta) gevşetildikten sonra arka yükseklik yükseklik ayarlanabilir.

Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir. Uzman satıcı tarafından farklı bir arka yüksekliğe dönüşüm mümkündür.

Fotoğraf hala çekiliyor

56 Sırt Açısı

- Arka açı işaretli vida bağlantısı (her iki tarafta) gevşetildikten sonra ayarlanabilir.

Tekerlekli sandalye müşterinin emrine göre inşa edilmiştir. Uzman satıcı tarafından farklı bir arka açığa dönüşüm mümkündür.



57 Arka aç (açı ayarlanabilir arka ile)

- Gösterildiği gibi, bir elinizle tetik halatı çekin ve diğer elinizle geri konstrüksiyonu geriye doğru hareket ettirin.



- Her iki cıvata akustik akustik istenilen arka açı konumuna yapışmasını bekleyin.

5.8 Aktiv Açısı

Aktüatör, sırt dayasının konumunun sürücü tekerleği aksına oranını açıklar. Sırt dayaması tahrik tekerleği aksının arkasına ne kadar ayarlanırsa, **supra 2.0** o kadar aktif hale getirilebilir. Tersine Üzerinde veya sürücü aksının önünde, daha eğimli bir sürüş pozisyonu anlamına gelir.



Dikkat!
Üst düzey ayarlar yetenekli bir sürücü ve eğim koruması kullanımını gerektirir.



5.9 Devrilme önleyici koruma

- Eğim koruması, işaretli vida bağlantısını gevşettikten sonra bir açıyla sonsuz şekilde ayarlanabilir.

Eğim koruması, eğim koruma tüpünün ucundaki silindirin tahrik tekerleğinin yarıçapının ötesine bakacak şekilde ayarlanır ve yerden yaklaşık 2-3 cm yukarıda durur.



Tripod yayı bastıktan sonra, eğim koruma borusu uzunluğu eğim koruma tutucuda üç pozisyonda (her biri 2,5 cm mesafe ile) ayarlanabilir.





5.10 Hızlı sürümile sürücü tekerlekleri kaldırma

Tahrik tekerlekleri plug-in akslar tarafından kaldırılabilir. Bu şekilde, daha küçük bir taşıma boyutu elde edilebilir.

- Sürücü tekerleğinin bezinin yanındaki kollara tutun ve başparmağınızla aksın serbest bırakma düğmesine basın.
- Daha sonra itru-aks ile tahrik tekerleği dışarı soketi çekin.
- Plug-in akslarına takılmamak için, plug-in akslarını tahrik tekerleklerinin yataklarından çıkarmak daha güvenli olabilir.
- Aşağıdaki gibi sürücü tekerleklerinin eki gidin:

"4 Kullanılabilirliğin teslimi ve imalatı"

Daha önce açıklanmıştır.



Dikkat!

Aksların güvenli bir şekilde yerinde kilitli olup olmadığını her sürücü tekerleğinde bir ile kontrol edin.



5.11 Hava lastikleri / PU lastikleri

Tahrik tekerlekleri hava lastikleri ile donatılabilir. Araç valfleri, Herhangi bir dolum istasyonunda veya en az 6 bar (600kPa) Basınç üretebilir uygun pompalar ile basınç.

Kılıf üzerinde belirtilen maksimum hava basıncına dikkat edin.



Hava lastikli jantlar hortumlarla donatılmıştır. Onlar bisiklet ticaret mevcut onarım malzemesi ile tamir edilebilir.



Tahrik jantları delinmeye dayanıklı PU lastiklerle de donatılabilir.



5.12 Tutucu

Alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmış tutucu lastikler vardır.

Standart apa sahip veya daha byk apa sahip tutucu lastikler yetiřtirilebilir.

Buna kavrama halkası "standart" veya kavrama halkası denir. "yksek".

Tekerlekli sandalye mřterinin emrine gre inřa edilmiřtir. Uzman satıcı tarafından bařka bir tutucu lastięe dnřtrme iřlemi mmkndr.



Tm tutucu lastikler "dar" veya "dar" "geniř" yetiřtirilebilir.

6 Aksesuarlar

retici tarafından zaten monte edilmemiřse, tm aksesuarlar nitelikli personel tarafından monte edilmelidir. Yine de daha iyi bir anlayıř iin, kalifiye personel iin bazı kurulum talimatları burada listelenmiřtir.



6.1 Bacak uzunluęu

Tekerlekli sandalye mřterinin emrine gre inřa edilmiřtir.

Paraları (her iki tarafta) gevřetip ıkardıktan sonra, alt bacak uzunluęu sonsuz olarak ayarlanabilir.

- Daha sonra kelepevidaları tekrar sıkıca sıkın



Tm ayarlama alıřmalarından sonra, her iki tarafta daha nce gevřetilmif paraları sıkın.



6.2 Bel Kemerı

Pelvik kemer SUPRA 2.0 için bir seçenek olarak sipariş edilebilir. Bu, koltuk plakasına bağlı olan pelvik kemer tutucusu ile verilir.

Serbest kemer ucunun uzunluğu pelvik kemer uzunluğunun uzunluğunu belirler. Kırmızı düğmeye basıldığında pelvik kemer açılır.

Kemer kilidinde, pelvik kayış hala kemer ucunu sıkarak yeniden gerilebilir (ince ayar).



7 Taşıma

7.1 Bagajda

SUPRA 2.0, boyut ve ekipmana bağlı olarak tek parça halinde taşınabilir.




7.2 Engelli taşıma aracı taşıma için tekerlekli sandalye kullanımı

Dikkat!

Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli taşıma aracıyla araç kullanırken araca ve ilgili emniyet sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır. Bir kaza durumunda onları en iyi şekilde korumanın tek yolu budur.

SUPRA 2.0 bir Engelli koltuk olarak onaylanmıştır!

Her zaman engelli taşıma aracı taşıma sırasında, kemer başına çekme kuvveti (max.10 kg) aşılmamalıdır, aksi takdirde tekerlekli sandalye nin çerçevesine zarar oluşabilir emin olun.

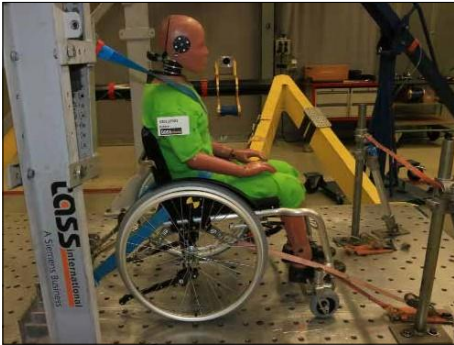

7.3 Genel

- Tekerlekli sandalyenizin çarpışma testi için uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Aracın tekerlekli sandalyenizi taşımak için donanımlı ve uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Kemer eğrisinin doğru olduğundan emin olun.
- Buna ek olarak, güvenli ulaşım için yeterli alan olmalıdır.
- Taşıma sırasında dik oturma pozisyonu sağlanmalıdır.



Engelli bir taşıma aracıyla tekerlekli sandalyenin uygunsuz kullanımının tipik kullanımdan daha tehlikeli olabileceğini belirtmek isteriz.

Bu tavsiyeye uyulmaması ciddi bir yaralanma ve hayati tehlike riskidir.




7.4 Bir BTW tekerlekli sandalye güvenliğini sağlamak



Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli bir taşıma aracında (BTW) sürüş sırasında araca ve ilgili emniyet sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır. Bu, işgalcilerin En iyi şekilde korunur. **SUPRA 2.0**, uluslararası ISO 7176-19 standardına (çarpışma testi) uygun olarak başarıyla test edilmiştir. Bu, Supra uygun emniyet sistemleri 2.0, bizim tarafından sunulan taşıma sigortaları ve uygun emniyet sistemlerinin kullanımı kullanılarak KDV'ler kayıtlı bir ofis olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır. Genel Müdürlük

- 1) Kullanıcı tekerlekli sandalyedeyse, kullanıcı tekerlekli sandalye için sabitleme kemerleri ve emniyet kemerleri ile seyahat yönünde sabitlenmelidir (WTORS'a uygun bağlama kemerleri ISO 10542 veya SAE J2249 gerekliliklerine uygun olmalıdır) kısıtlama sistemi üreticisinin talimatlarına uygun olmalıdır.
- 2) Tekerlekli sandalye, bir und araçta sadece ileriye doğru ve başka bir konumda değil de ulaşım için dinamik olarak test edilmiştir, bu nedenle tekerlekli sandalye yanlara taşınamayabilir.
- 3) Tekerlekli Sandalye taşıma sırasında, tekerlekli sandalyenin büyüklüğüne bağlı olarak manevra kabiliyetinin bozulduğuna ve tekerlekli sandalyeyi döndürmenin veya döndürmenin mümkün olmadığından ya da sadece sınırlı bir ölçüde, rol koltuğunu seyahat yönünde öne doğru konumlandırmanın mümkün olmadığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır.

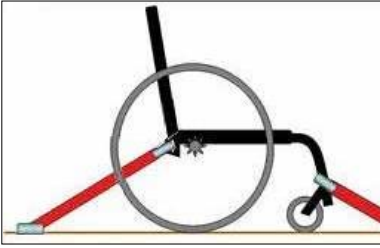

- 4) Tekerlekli sandalye, ISO 10542 veya SAE J2249'a uygun olarak, önde ayarlanabilir olmayan kayışlar ve arkada karabina kancaları/S şeklinde kancalar ve plug-in bağlantı elemanları gibi ayarlanabilir kayışlar ile bir emniyet sistemi ile güvence altına alınmalıdır.
Emniyet sistemleri genellikle ürünün dört köşesine bağlı olan 4 tek kayıştan oluşur.
Bağlama sistemlerinin montaj noktaları uluslararası kanca sembolü ile işaretlenmiştir.
- 5) Tekerlekli sandalye de diğer konumlandırma ve fiksasyon sistemleri ile taşıma için takviye edilebilir. Ancak, bunlar yolcu ve kısıtlama sistemlerinin yerini tutmaz ve kullanıcı konforunu sınırlamamalıdır. ISO 7176-19 Ek D'nin test yöntemlerine göre tekerlekli sandalye ile bir araca demirleyen kemerlerin yerleştirilmesi "kötü" olarak değerlendirildi.



SUPRA 2.0 sadece seyahat yönünde ileri kullanılabilir.



Tekerlekli sandalye seyahat yönünde dinamik olarak test edildi, kukla pelvik kayış ve omuz askısı ile tutturdu ise.



Araç yolcularının yaralanma riskini azaltmak için, kaza güvenliği için özel olarak tasarlanmayan ekipmanlar ayrı ayrı çıkarılmalıdır.
Koltuk destekleri, gevşek yastıklar, terapi masaları, vb gibi güvenli bir şekilde araç, saklanır.



Tekerlekli sandalyenin gevşeme noktalarında veya üreticiye danışmadan şasi ve çerçevenin bileşenlerinde değişiklik yapılamaz veya değiştirilemeyebilir. Bu özelliklere uyulmazsa, sandalye araçlarla taşınamayabilir. Sandalye



7.5 Tekerlekli sandalye yolcusunun tokaları



Kullanıcı hem pelvik kayış ve omuz askısı ile bağlı olmalıdır.

Omuz ve pelvik kayışlar, araç bileşenlerine çarpması sonucu oluşabilecek yaralanmaları en aza indirmek ve/veya önlemek için kullanılmalıdır.

- 1) Bağlantının gerçekleştirildiği kişi, sistemin işleyişinde veya eğitilmelidir.
- 2) Taşımadan önce tekerlekli sandalye aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:
Koltuk: 0° - 5°
Geri: 90° - 100°
Fußbank: 90°
- 3) Yolcu kısıtlama sisteminin pelvik kayışı 30°-75° açıyla yatay olmalıdır. Bu alan underordifold olmamalıdır aşıldı. 75° ye yakın bir açı Arzu edilir.

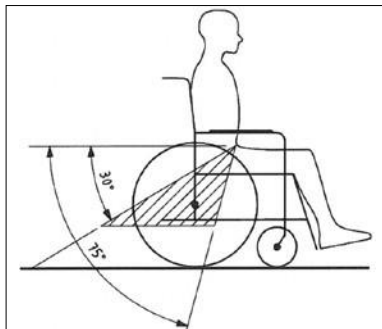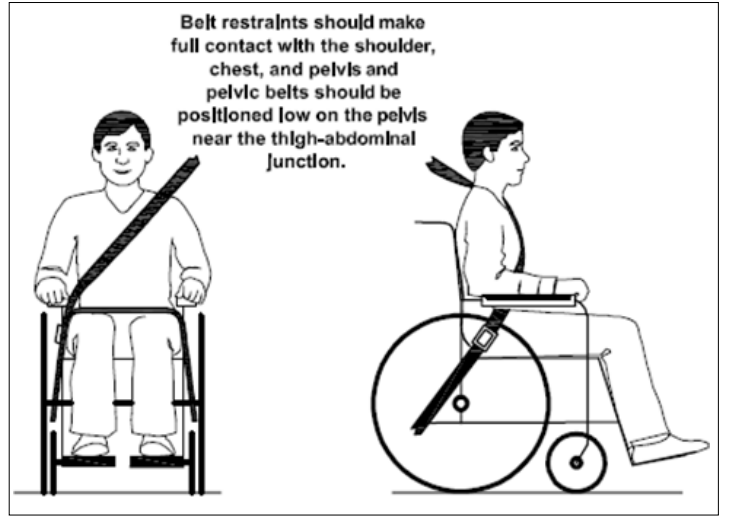

4) Omuz askısı göğüs ve omuz boyunca yönlendirilmelidir. Boyuna bağlı olmamalı ve omuzdan serbestçe asılmamalıdır.



Pelvik kemer ve omuz askısı vücuda mümkün olduğunca sıkı bağlanmalı ve koldaya veya tekerlek gibi tekerlekli sandalye bileşenleri ile vücuttan uzak tutulmamalı ve kullanıcı konforunu kısıtlamamalıdır.

5) Kayış bükülmemelidir.



Mümkün olduğunca, tüm yardımcı tekerlekli sandalye den kaldırılmalı ve koltuk değneği, gevşek yastık, terapi tabloları, vb gibi güvenli bir şekilde saklanır.

6) Kullanıcı nın kafası ayrıca BTW'de ayrı ve sabit bir başlıkla güvence altına alınmalıdır.



ISO 7176-19:2008 gerekliliklerine göre etiketlenmedikçe yolcu kısıtlama sistemlerine güvenmemelisiniz.

7) Taşıma sırasında tambur freni uygulanmamalıdır.

8) Manuel fren sıkıca sıkılmalıdır.



Yolcu kısıtlama cihazının, bir kaza durumunda serbest bırakma düğmesinin tekerlekli sandalye bileşenleri tarafından tetiklenmeyecek ve emniyet kemerlerinin kasıtsız olarak açılmasıyla sonuçlanacak şekilde konumlandırılın.

9) Ancak, bir trafik kazası durumunda, yolcu ve tekerlekli sandalye tutma sistemleri doğru kullanılsa bile, yaralanma riskinin En aza indirgenmiş ve dışlanmaz.



Bir Engelli Araç ile bir çarpışma veya kaza dan sonra ser tekerlekli sandalye yeniden kullanmadan önce, tekerlekli sandalye kontrol edilip olası hasar için otomatik gül uzmanları tarafından serbest bırakılana kadar tekerlekli sandalye artık bir taşıma için kullanılamaz.

Tekerlekli sandalyede ürünlerimiz ve taşıma güvenlik cihazlarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bayinizle irtibata geçmekten çekinmeyin.



Sabitlenme noktası, ISO 7176-19 göre ön



Sabitlenme noktası, arka pelvik kemer için iso 7176-19



ISO 7176-19'a göre sabitleme noktaları, arka

7.6 Trenlere binmek, inmek ve deęiřtirmek



Dikkat!

- Uaęa binmeden ve inmeden Yakın. nce In- onun zaman frenleri kapatın.
- Tekerlekli sandalyeyi emniyete alan bir asistanla ilk giriřleri pratik edin ve eęilme eęilimi durumunda ayak ve koltuk ykseklięi ayarını deęiřtirin.
- Direksiyon atalını ne evirerek eęilme emniyetini artırın (bu dingil mesafesi artar).



Ergenlerde, belirli bir yař, aęırlık ve fiziksel anayasaya baęlı olarak yan blm zerinden yanal transfer yapmak daha avantajlı olabilir.

- Bunu yapmak iin, ilk olarak tekerlekli sandalyeyi yaklaşık 45° bir aıyla, hangi koltuk veya tekerlekli sandalyeye aktarın.
- Frenleri kilitleyin.



Transfer sırasında destek iin, koltuk/arka yzey, kavrama lastikleri ve kısa bir sre iin yan paralar da uygundur.

Transfer, gvenli bir řekilde bařarılı olana kadar bir asistanla yapılmalıdır. Transfer tek bir noktada yapılmalıdır.

Son olarak, park frenleri gevřetilebilir ve tekerlekli sandalye kullanılabilir.

ıkarken ters sırada ilerleyin.

7.7 Merdivenleri veya benzeri merdivenleri abartırken eęilme koru

SUPRA 2.0 eęim koruması ile donatılabilir. Eęim koruması tekerlekli sandalyenin eęim emniyetini artırır.

Eęim korumasının iřlevleri ve ayarları
"4 Kullanılabilirlięin teslimi ve imalatı"
Ve**"5,9 eęim koruması"** altında.



Dikkat!

Merdivenlerin ařması sadece yardımcı bir kiři tarafından mmknse, aktif pozisyonadaki eęim koruması dřmeye yol aabilir.

Eęim korumasını, tařıma sırasında basamakların zerine yerleřtirememesi iin etkin olmayan konuma getirin.





8 Depolama

Boyutu ve ekipman bağılı olarak, SUPRA 2.0 katlanmış sırtlık ve yükseltilmiş ayak ile tek parça saklanabilir.



Bakım notu!

SUPRA 2.0'ı depolamadan önce iyice temizleyin. 27. sayfadaki bakım talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.



Ancak, sadece birkaç basit adımla birkaç küçük paketler halinde tekerlekli sandalye sökmek mümkündür.

En küçük paket boyutuna sırt dayaması katlayarak ve tahrik tekerlekleri çıkarılarak ulaşılabilir.



Bakım notu!

SUPRA 2.0'ı depodan sonra iyice temizleyin. 27. sayfadaki bakım talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

9 Geri dönüşüm ve bertaraf

SUPRA 2.0 geri dönüştürülebilir malzemelerden ilerler.

Ürün ambalajı ve tüm metal, alüminyum ve sentetik malzeme parçaları geri dönüştürülebilir meblağ için kullanılabilir.

Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Yerel atık yönetim şirketleri için lütfen şehir yönetimine danışın.

10 Bakım, bakım ve servis ömrü

SUPRA 2.0 CE işaretlidir. Üretici, bu ürünün bir bütün olarak AB Parlamentosu ve Konseyi'nin 2017/745 sayılı Yönetmeliği Ek I'de belirtilen temel gerekliliklere uygun olmasını sağlayacaktır.

Prensip olarak, tekerlekli sandalyenin işlevselliği, özellikle frenler, her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Kendi kendine kilitleme ile fındık sadece bir kez kullanılmalıdır. Birkaç gevşeme sonra, bu somunlar değiştirilmelidir.

Aşağıdaki listede açıklanan kontroller kullanıcı tarafından belirtilen aralıklarla yapılacaktır.

Sınav	faaliyetleri Günlük kalkıştan önce	Haftalık Aylık
Frenin fonksiyonel testi	X	
Eğim korumasının fonksiyonel testi	X	
Tahrik tekerleklerinin sabit koltuğu (fiş aksları)	X	
Ayak tahtasının gücünü test etme		X
Hava basıncı (lastik kılıfındaki endikasyona bakın)		X
Hasar için kavrama halkası		X
Vida bağlantılarının test edilmesi		X
Tekerlekler ve rulmanlar gibi aşınma parçalarının görsel denetimi		X
Rulmanlarda kirlilik		X
Tahrik tekerleğinin konuşma geriliminin test edilmesi		X

Herhangi bir kusur bulursanız, bunları çözmek için yetkili satıcınıza başvurun.

Ayrıca yetkili satıcınız tarafından her 12 ayda bir düzenli bakım yapmanızı öneririz.

Bakım

- Döşeme parçaları 40 °C'de yıkanabilir. Çamaşır makinesi, ancak, sadece bir yıkama torbası veya yastık kılıfı.
- Çoğu durumda, nemli bir bezle silme yeterlidir.
- Tuzlu suda faydası Yavuz.
- Mümkünse, kum veya diğer kir parçacıkları tekerleklerin yatak saldıran kaçının.
- Bu Is Tekerlekli sandalyeniz Sonra Tekerlekli sandalye ıssa, tekrar kurutulması tavsiye edilir.
- Saç veya kir parçacıkları genellikle direksiyon çatal ve direksiyon simidi arasında birikir, hangi zaman içinde direksiyon kullanımı daha zor hale. Direksiyonu çıkarın ve çatalı ve direksiyonu hafif bir ev temizleyicisi ile iyice temizleyin.
- Tahrik tekerlekleri plug-in akslar aracılığıyla çıkarılabilir. Bu sistemin işlevsel kalabilmesi için, hiçbir kirin aksa veya aks yakına yapışmadığından emin olmalısınız. Reçineler içermeyen dikiş makinesi yağı ile zaman zaman aksı kolayca yağlayın.
- Özellikle ilk günlerde veya tekerlekli sandalyede ayarlama çalışması ndan sonra vida bağlantılarının mukavemeti kontrol edilmelidir. Bir vida bağlantısı tekrar tekrar gevşetilirse, lütfen ilgili satıcıya başvurun.



SUPRA 2.0 Faydalı yaşam:

SUPRA 2.0'in beklenen kullanım ömrü, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 6 yıldır. Yetkili satıcı tarafından yıllık gözetim öneririz. Tekerlekli sandalyede arıza veya arıza olması durumunda, bu durum derhal ambulans servisine veya onarım için uzman satıcıya teslim edilmelidir.

11 Teknik veriler

	Çerçeve boyutu 1	Çerçeve boyutu 2	Çerçeve boyutu 3
Koltuk genişliği	240 - 340 mm	280 - 380 mm arası	280 - 380 mm arası
Koltuk derinliği	190 - 340 mm	200 - 390 mm arası	250 - 440 mm arası
Arka yükseklik	200, 250, 300, 350 mm	200, 250, 300, 350 mm	200, 250, 300, 350 mm
Koltuk yüksekliği* (ön)	360 - 450 mm arası	380 - 470 mm arası	430 - 510 mm arası
Oturma Açısı	yaklaşık 0° ila 10°	yaklaşık 0° ila 10°	yaklaşık 0° ila 10°
Arka açı (arka sabit)	-10° ila +10°	-10° ila +10°	-10° ila +10°
Sırt Açısı (Geri kabartma pozisyonu ile)	15°	15°	15°
Diz altı (Bacak) Ölçüsü	160 - 400 mm arası	190 - 410 mm arası	230 - 460 mm arası
Fußbrettwinkel	ayarlanabilir yaklaşık. +/- 10°	ayarlanabilir yaklaşık. +/- 10°	ayarlanabilir yaklaşık. +/- 10°
Arka Tekerlek ölçüleri	20" (508 mm)	22" (559 mm)	24" (610 mm)
Ön Tekerlek Ölçüleri	100, 125, 140 mm	100, 125, 140 mm	100, 125, 140 mm
Devrilme desteği açısı	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Kullanıcı ağırlığı** / Maksimum yük	60 kg	75 kg	75 kg
Ağırlık ***	9,3 kg	9,9 kg	10,5 kg
Toplam uzunluk maksimum / minimum	750 mm / 600 mm	830 mm / 660 mm	910 mm / 720 mm
Toplam genişlik maksimum / minimum	620 mm / 460 mm	680 mm / 460 mm	700 mm / 470 mm
Yükseklik maksimum / minimum	670 mm / 530 mm	710 / 540 mm	750 mm / 550 mm
Şase Ağırlık (en ağır kısmı)	6,1 kg	6,4 kg	6,8 kg
Statik kararlılık (ileri/geri/yan)	>10°	>10°	>10°
Maksimum eğim (park frenleri kullanımı için)	10°	10°	10°
Diz Açısı	90°	90°	90°
Minimum dönüş aralığı	1100 mm	1100 mm	1100 mm



Dikkat!

*Koltuk yüksekliği çerçeve boyutuna, tekerlek çapına ve tekerlek düşüşüne bağlıdır.



Dikkat!

**Aksesuarlar ve ekler, yolcu için kalan taşıma kapasitesini azaltır.



Dikkat!

Ağırlık temel ekipman ve maksimum koltuk genişliği bir **SUPRA 2.0** anlamına gelir.

Notlar

[illegible]

Notlar

HOGGI Ltd. Şti.
OSB Güldiken Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi No:16 • 40100
Kırşehir • Türkiye
Telefon:(+90) 0 386 272 1224 •
E-posta: info@hoggi.com.tr • www.hoggi.com.tr