
HOGGI®



Basic İ mekân Engelli Aracı Kullanım Kılavuzu


tr

1	Model Tanımlama & Temel Ekipmanlar	3
1.1	Model tanımlama ve İsim plakası	3
1.2	Temel ekipmanlar	3
2	Genel Bilgi	
2.1	Önsöz	4
2.2	Kullanım Alanı	4
2.3	Uygunluk Beyanı	5
2.4	Garanti Koşulları	5
2.5	Servis ve onarımlar	5
3	Güvenlik talimatları	6
3.1	Sembolizmin anlamı	6
3.2	Genel güvenlik talimatları	6
4	Kullanılabilirliğin teslimi ve imalatı	9
5	Ayarlama ve ayarlama seçenekleri	10
5.1	Fren 125 mm Jantlar	10
5.2	Fren 75 mm Jant	10
5.3	Yükseklik ayarı	11
5.4	Koltuk Açısını değiştirme	11
5.5	Koltuk ünitelerini kaldırma ve kurma	11
5.6	Kullanmadan önce statik stabilizenin test edilmesi	12
6	Aksesuarlar	13
6.1	İtme Çubuğu	13
7	Depolama	13
8	Bakım, servis ömrü ve bakım	14
9	Geri dönüşüm ve bertaraf	15
10	Teknik Özellikler	15

1 Model Tanımlama & Temel Ekipmanlar

1.1 Tip plakası üzerinden model tanımlama

(Tip plaka aks tüpü üzerine monte edilir, oklar bakın)

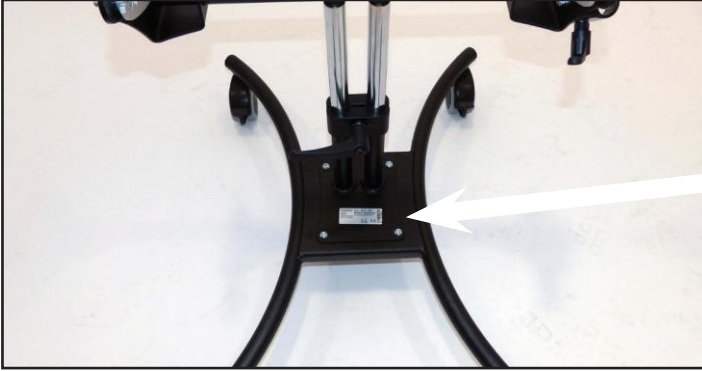

Makale

Seri numarası

CE işareti



Tür belirtme / ürün adı

Maksimum Kullanıcı Ağırlığı /
Maksimum yük



Üretici Üretim Yeri

Üretim yılı

1.2 Temel

- Çelik boru konstrüksiyonunda taban, toz kaplı
- 75 mm çapında ayarlanabilir rulolar, isteğe bağlı 125 mm
- Koltuk Açısı 0- 32°
- Adım adım yükseklik ayarı
- Taşıma Kapasitesi: 60 kg

2 Genel bilgiler

2.1 Önsöz

30° koltuk kenarı ile **BASIC** oda tabanını seçmiş ve firmamızdan yüksek kaliteli bir ürün alabilirsiniz. Böylece oldukça uzun bir süre için bu ürün ile eğlenceli bir sürü var ve günlük yaşam kolaylaştırmak için yardımcı olur.

Size doğru ve kolay kullanımı ve gerekli bakım ve bakımı gösterir. Çalışma hatalarından kaynaklanan hasarları önlemek ve en iyi kullanıma izin vermek için lütfen aşağıdaki talimatları veya talimatları dikkatle okuyun.

Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen uzman bayinizle irtibata geçiniz. Kolay kullanımlı olmasını diler, ürünümüzün beklentilerinizi karşılamasını dileriz.

Bu kılavuzda açıklanan sürümde herhangi bir değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tekerlekli sandalyeyi ilk kez kullanmadan önce, kullanıcı ve yardımcı personel tekerlekli sandalyenin güvenli kullanımını sağlamak için kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

2.2 Amaç

30° koltuk kenarına sahip **BASIC** oda tabanı iç Mekân kullanımı için kullanılabilir. Bingo-Evolution koltuk ünitesi veya koltuk kabuğu taşıyıcısında bir koltuk kabuğu ile birlikte, bu sistem harici taşıma sırasında bireysel kullanım için engelli ve engelli çocuk ve ergenlere hizmet vermektedir.

Oturma sistemi tıbbi olarak aşağıdakiler için endike olabilir:

- Felç (parapleji/tetrapleji veya parezis)
- Organ kaybı
- Spina Bifida
- Kas ve sinir hastalıkları
- Osteogenezis Imperfecta
- Çocuk felci

BASIC oda tabanı genellikle yeniden kullanım için uygundur.

Yeniden kullanım için, söz konusu ürünün önce iyice temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir. Ürün daha sonra durum, aşınma ve hasar için yetkili bir profesyonel tarafından kontrol edilmelidir. Tüm yıpranmış ve hasarlı parçalar ve kullanıcı için uygun olmayan/uygun olmayan bileşenler değiştirilmelidir. Bazı bileşenler yeniden eklenebilir, örneğin

Direksiyon veya sürgülü braketler. Ayrıntılı bilgi ve gerekli araçlar hakkında bilgi servis kılavuzunda bulunabilir.

2.3 Bildirim

Hoggi GmbH, üretici olarak, **MDD** 2007/47/EC'deki değişiklikleri dikkate alarak, TEMEL depolama sisteminin Tıbbi Cihazlar hakkında Yönetmelik 93/42/ EEC'ye Ek-I'de belirtilen temel gerekliliklere uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder. Uygulanabilir uyum standartları uygulanmıştır.

BASIC oda astı ISO 7176-8 gerekliliklerini karşılar.

2.4 Garanti koşulları

Garanti, yalnızca ürünün belirtilen koşullar altında ve amaçlanan amaçlar için kullanılması durumunda verilebilir. Üretici tarafından onaylanmayan bileşenlerin ve yedek parçaların neden olduğu hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Hüküm ve koşulları buradan veya www.hoggi.de'daki hüküm ve koşulların .

(1) Alıcının herhangi bir garanti hakkı için ön koşul, Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 377.

(2) Garanti talepleri, risk intikalinden sonraki 12 ay içinde ileri sürülebilir

(3) Haklı kusurlar durumunda, kusuru (düzeltme) veya mümkün olan en kısa sürede değiştirme teslimatını profesyonel cereyan ederek kendi takdirimize bağlı olarak tamamlayıcı performans gerçekleştireceğiz.

(4) Tamamlayıcı performans türlerinden biri veya her ikisi imkânsız veya orantısız ise, Onları reddetme hakkımız var. Alıcı, hizmetin hatasız kısmına eşdeğer bir ölçüde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece sonraki performansı da reddedebilir.

(5) Kusurların düzeltilmesi veya yerine teslim makul bir süre içinde başarısız olursa, alıcı satın alma fiyatını düşürme veya sadece küçük bir kusur yoksa sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(6) Alıcı tarafından diğer doğrudan veya dolaylı zararlar yerine performans ve tazminat için özellikle diğer doğrudan veya dolaylı hasarlar için diğer talepler- eşlik eden veya dolaylı hasar da dahil olmak üzere- ne olursa olsun yasal neden- hariç tutulur. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, hasarın nedeni kasıtlı veya ağır ihmalkâr bir görev ihlaline dayanıyorsa veya hizmetin kalitesi için bir garanti ortaya çıktıysa veya yaşam, beden veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar talep edilirse geçerli değildir. Sorumlu olduğumuz teslimattaki gecikme, temel bir sözleşme yükümlülüğünün veya kardinal yükümlülüğünün kusurlu ihlaline dayanıyorsa, yasal hükümlere göre sorumlu oluruz; bu durumda, zararlar için sorumluluk öngörülebilir, genellikle meydana gelen zarar ile sınırlıdır.

2.5 Servis ve onarımlar

30° koltuk kenarı olan BASIC oda tabanındaki servis ve onarımlar sadece uzman perakendeciler tarafından yapılabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen satıcınıza başvurun. Onarım durumunda, sadece orijinal yedek parça alacaksınız.

Bölgenizde uzman bir bayi bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bize (info@hoggi.de) adresinden ulaşabilirsiniz.

Temel	Bakım Kitapçığı	1910-2017
Temel	Yedek parçalar	1910-1017



Kurulum, bakım ve onarım için aşağıdaki araçlar gereklidir:

Alyan boyutu: 3 mm, 4 mm, 5 mm ve 6 mm

Boyut anahtarlar: 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 24 mm

3 Güvenlik

3.1 Sembolizmin anlamı



Dikkat!

Olası kaza ve yaralanma tehlikeleri ve olası teknik hasarlar için uyarılar.



Değil!

Cihaz çalışması için.



Değil!

Servis personeli için.



Dikkat!

İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun!

3.2 Genel güvenlik talimatları



İlk olarak, kullanım kılavuzunu okuyun!

Kullanmadan önce, önce ürünün kullanımı ve işlevi hakkında bilgi edinin ve önce işleme alıştirması yapın.

Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu talimatlara uymazsanız çocuğunuzun güvenliği tehlikeye atılabilir. Ancak, tüm olası koşullar ve öngörülemeyen durumlar Kapsanmış. Akıl, dikkat ve ihtiyatlılık bu ürünün getiremeyeceği faktörlerdir; üssü kullanan veya eşlik eden kişi tarafından sağlanır. Taban ve aksesuarları kullanan kişi tüm talimatları anlamalıdır. Üssün çalışmasını, tabanı ve ilişkili aksesuarları kullanan herhangi bir kişiye açıklamanız gerekir.

Talimatlar anlaşılmaz ise ve daha fazla açıklama gerekiyorsa veya daha fazla sorunuz varsa, lütfen **HOGGI** bayinizle iletişime geçin.

İlk olarak, düz, yönetilebilir arazide çocukla sürüş uygulama. Ağır nokta kaymalarının üssün davranışı üzerindeki etkilerini çocukla keşfedin, örneğin düşme pistleri, eğimler, tüm eğimler veya engellerin üstesinden gelirken, ancak sadece bir yardımcının güvenli desteğiyle.



Her zaman TEMEL oda alt geçidinde oturma sistemi içinde çocuğunuzun toka.



Oda tabanı kullanımının tipik kullanımdan daha tehlikeli olabileceğini lütfen unutmayın. Bu ürün koşu, yarış, paten veya benzeri için uygun değildir. Direksiyon ön tekerlekleri daha yüksek hızlarda başlayabilir

Bu da üssün aniden durmasına ve devrilmesine yol açabilir. Lütfen oda tabanını sadece normal yürüme hızında kaydırın. Hiçbir koşulda, itme sırasında odanın alt çerçevesinin serbest bırakılması veya itilen bir şekilde geri püskürtülebilir.



Ürün sadece düz ve düz yüzeylerde kullanılabilir.



BASIC oda tabanınızı yalnızca amaçlandığı gibi kullanın. Örneğin, bir engele (sahne, kaldırım) karşı frensiz sürüşten kaçınınız.



Merdivenler sadece eşlik eden kişilerin yardımıyla tırmanılabilir. Rampa, asansör veya asansör gibi ekipmanlar bu amaçla mevcutsa, bunlar kullanılmalıdır. Rampa, vb. tesislerin yokluğunda, iki yardımcının taşınması ile engelin aşılması gerekir. Kaldırma için, oda tabanını sadece sıkıca kaynaklanmış veya sıkıca vidalanmış çerçeve parçalarına takın.



Eğimler, eğimler ve rampalarda engeller üzerinde sürüş yaparken her zaman yolcunun gövdesini çok ileriye doğru yatırın. Yollara kontrolsüz, ancak daha düşük hızda inme. Ağırlık merkezini değiştirerek direksiyonun rölyef direksiyon, direksiyon çarpınmalarına yol açabilir.



Oda tabanı prensipte sadece yatay, düz yüzeylere yerleştirilmelidir.



Park frenlerinin kusursuz etkisi için maksimum eğim 5°'dir.



Çapraz adımlar ve zemin uyuyanlar sadece özel öngörü Adası



Oda tabanından çıkmadan önce, ya da uçağa binmeden ve inmeden önce, her zaman dört tekerleğin frenlerini kapatın.



Ambalajın çocuklardan uzak tutulduğundan emin olun. Plastik ambalaj kullanırken, işaretleme riski vardır.



Bertaraf: Ürün ambalajı ve tüm metal, alüminyum ve plastik parçalar geri dönüştürülebilir meblağ için kullanılabilir. Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Lütfen yerel atık yönetim şirketleri hakkında belediye/belediye yönetimine danışın.



Ambalaj hasarlıysa ürünün durumunu kontrol edin.



BASIC oda tabanındaki oturma sisteminde çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın. Kemerleme ile sabitlenmiş ve frenler tespit edilebilse bile.



BASIC oda tabanının maksimum yükü 60 kg'dır. BINGO-Evolution koltuk ünitesinin maksimum imale yük kapasitesi (diğer yük dahil vücut ağırlığı) 50 kg'dır.



Tüm aksesuarlar ve ekler kalan yükleme kapasitesini azaltır.



Mümkünse ve mümkünse, araç yolcuları engelli bir taşıma aracında (BTW) sürüş sırasında araca ve ilgili emniyet sistemlerine monte edilmiş koltukları kullanmalıdır. Bu, bir kaza durumunda yolcuları en iyi şekilde korumanın tek yoludur.

Temel oda tabanı KDV'ler Yayınlanan. Koltuk olarak kullanılmak üzere **olarak dalalı**.



Koltuk kabuklarının montajına sadece yapısal olarak belirtilen koltuk içinde izin verilir. Bu yeni kombinasyonun üreticisi devrilme stabilitesini, her yöne en az 5° eğimi ve devreye almadan önce maksimum yüke uyumu kontrol etmelidir. Koltuk ve arka plakaları kullanırken, basınç noktalarından kaçınmak için her zaman yastıklı koltuk minderleri kullanın!



Aşırı sıcaklıklarda dikkat. BASIC oda tabanının çerçeveleri güneş ışığı, radyatör veya sauna nedeniyle güçlü bir şekilde ısınabilir. Aşırı soğukta hipotermi riski vardır. Duyarsız cilde sahip kişilerde (yani sıcaklık artışını algılayamayan kişilerde) ve/veya cilt hasarı olan kişilerde, metal parçaların çok yüksek bir sıcaklığa ulaşmaması için dikkatli olunmalıdır. Bu gibi durumlarda, cildi korumak için uygun giysiler giymek zorunludur.



Görme engelli kişi veya bilişsel bozukluğu olan kişiler bilgi materyaline sahip olmalı ve yardımcı kişilerin kullanım kılavuzu yüksek sesle okunmalıdır veya elektronik okuma yardımcılarını kullanabilir. Tüm dokümanlar, Download Center'da www.hoggi.com.tr altında PDF tarihleri olarak mevcuttur. Buna ek olarak, ürün videoları ve ürün fotoğraf galerileri online olarak mevcuttur!



Ağırlık merkezinin kayması nedeniyle devrilme veya devrilme riski olduğundan, çocuğunuzun öğeleri (oda tabanının önünde veya arkasında) kavradiğinizda oda tabanından çok uzağa eğilmediğinden emin olun.



Statik kararlılık tüm ayarlarda 5°'den büyüktür. Ağır poşet veya benzeri eklemeler stabiliteyi olumsuz etkileyebilir.



Oda tabanına sadece bir çocuk tarafından taşınmasına izin verilir.



Yükseklik ayarı sadece oturma ünitesinde bir kullanıcı olmadan yapılabilir.



Plastik parçalar ve tekerlekler alev geciktirici malzemelerden imal edilmiştir.



Ürün güvenliği veya ürün geri çağırılmaları ve tüm iletişim bilgileri hakkında bilgi www.hoggi.com.tr sitemizde bulunabilir.



Tüm ayarlama çalışmalarından sonra, daha önce gevşetilmiş parçaları tekrar sıkıca sıkın.




4 Teslimat ve üretim bu, Kullanılabilirlik

Orijinal ambalajında aşağıdaki bileşenleri bulacaksınız:

- Monte silindirli temel çerçeve
- Koltuk tutucu ve sütun önceden monte edilmiştir.
- Kılavuzu
- Siparişe bağlı olarak aksesuarlar

Öncelikle, lütfen taşıma sigortalarını ve ambalajlarını dikkatlice çıkarın.

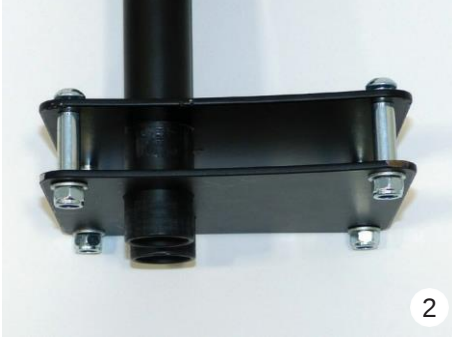


Sütunu yüklemek için lütfen aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Gevşetin ve gevşek vidalı fındık, yıkama, burçlar ve sayaç plaka kaldırın.
- Daha sonraki derleme için burada gösterilen sırayı hatırlayın.



- Kolon taban çerçeve içine yerleştirin ve daha fazla vidalama için oda desteğini dikkatlice yerleştirin sayfayı açın.

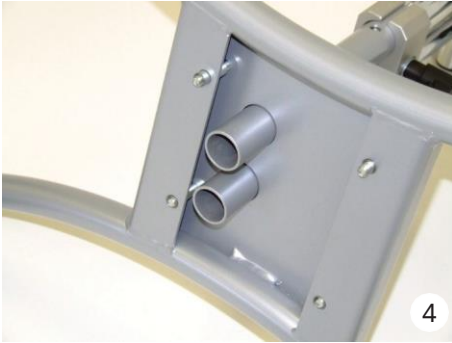

- Vidaları taban çerçevesinin üst kısmından takın.



- Ardından soketleri takın A.

- Tezgâh plakasını ve yıkamaları vidaların üzerine takın ve dört somunları çekin Sıkıca.



Bağlantı parçaları maksimum 15 Nm ile sıkın.



5 Ayarlama ve Uyarlama

Oda tabanı 75 mm çift direksiyon veya tek saf 125 mm jantlar ile donatılabilir.

5.1 Fren 125 mm jantlar

- Freni kapatmak için, fren koluna ayak ucuyla Aşağıda.



- Freni açmak için fren kolu üst tarafta ileri doğru itin.



5.2 Fren 75 mm Rolleri

- Freni kapatmak için, ayak ucuyla fren koluna bastırın.



- Freni açmak için, ayak ucu ile fren kolu çekin Yukarıda.





5.3 Yükseklik

- Koltuk ünitesini tek elle sabitle.
- Kelepçeyi gevşetmek ve koltuk ünitesini istenilen yüksekliğe taşımak için **bağlama kolu** kullanın.
- Tripod yay maksimum çekme yüksekliğinde yerine yapışıyor.
- Sonundaki bağlama kolu sıkıca sıkın.



Dikkat!

Kenetlenme tehlikesi. Eğer koltuk ünitesi bağlama kolu serbest bırakılması sırasında sabitlenmiş değilse, koltuk ünitesi duruncaya kadar contrifily aşağı doğru sarkıyor. Yükseklik ayarı sadece oturma ünitesinde bir kullanıcı olmadan yapılabilir.



5.4 Koltuk Ayarı

Koltuk eğimi 30° ayarlanabilir.

- İlk olarak, oda tabanının frenini kapatın ve oda tabanının yanında durun.
- Bir elinizle koltuğu arkalıktaki sabitle ve tetik kolu ağırlığından kaçınmak için **koltuk kenarını** açın.
- Daha sonra çubuklar koltuk kenarını serbest bırakana kadar serbest bırakma kolu yukarı doğru çekin ve koltuğu istenilen konuma yerleştirin.
- Serbest bırakma kolu ve mandal sesli olarak kırılana ve koltuk kenarı kilitlenene kadar koltuğu hareket ettirin.



Koltuk kenarındaki çubukların güvenli bir şekilde kilitlenip emniyetli olmadığını kontrol edin.



5.5 Oturma birimlerinin kaldırılması ve kurulması



Araçtaki oturma sistemini taşımak veya kaldırma işlemi ağırlığı iki kaldırma işleminde dağıtmak için koltuk oda tabanından kolayca ayrılabilir. Bir oda tabanında koltuk bir iç olarak kullanılırsa bu da önemlidir ve bir yol çerçevesi üzerinde bir yol kaynağı olarak kullanılır ve bu nedenle kolayca uygulanabilir olmalıdır.

- Oda tabanını, çıkarmadan veya takmadan önce tüm silindirlere kilitleyerek her zaman yuvarlanmaya karşı sabitleyin.
- Koltuk ünitesini çıkarmadan veya yerleştirmeden önce arkanın 90° konumda olduğundan emin olun. Yer almaktadır.

Kaldırmak

- Oda tabanının yanına çık.
- Koltuk kenarının deklanşör düğmesine basın ve kırmızı kilit düğmesi koltuk rulman plakası çarpına kadar koltuk ünitesini döndürün. Kırmızı kilit düğmesi diyaframın arkasında yer alır ve tetik düğmesinin penceresinde görünür hale gelir.




- Tetiği düğmesine basın ve basılı tutun.
- Oturma yüzeyi dikey olarak yere bakana kadar koltuk ünitesini koltuk rulmanlarından kaydırın.



- Koltuk ünitesini sırt dayamada ve diz açısında tutun ve koltuğu rulmanlardan yukarı doğru kaldırın.

Ayarlama

- Gösterildiği gibi, sırt dayama ve diz açısı üzerinde koltuk ünitesi kavramak Bir.
- Koltuk ünitesini, koltuğun oluşmuş gibi yere dikey olarak yerleştirilmesi için yerleştirin.
- Koltuk ünitesini oda desteğinin üst kısmından yerleştirin ve kılavuz şaftın (A) kenar rulman (B) içine kayar.
- Kilitleme mandalı 30° pozisyonunda (seviye 1) kenar çıtalara sesli olarak yapışana kadar koltuk ünitesini kaydırın.
- Koltuk ünitesini istenilen pozisyonda 5.4' e göre.

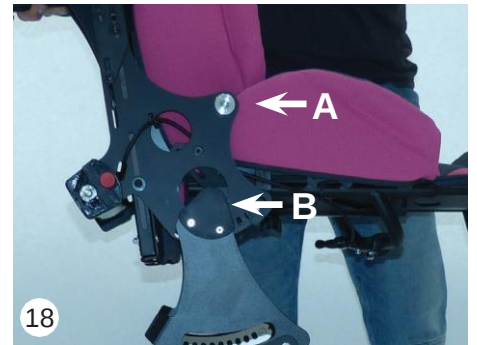

Koltuk kenarındaki çubukların güvenli bir şekilde kilitlenip emniyetli olmadığını kontrol edin.



5.6 Kullanımdan önce statik kararlılığı denetleme

Tüm kombinasyonları **Temel** Diğer koltuk kabukları ve koltuk sistemleri ile oda üsleri devreye almadan önce uzman satıcı tarafından statik stabilite için kontrol edilmelidir. Oda tabanı, oturma sistemi ve içinde çocuk ile, en elverişsiz ortamda 5° açıyla ters olmamalıdır. Test her yöne yapılmalıdır.



Dikkat!
Devrilme testini yalnızca başka bir yardımcının yardımıyla gerçekleştirin.





6 Aksesuarlar

Üretici tarafından zaten monte edilmemişse, tüm aksesuarlar nitelikli personel tarafından monte edilmelidir. Yinede, daha iyi bir anlayış için, bazı kurulum talimatları burada listelenmiştir.

6.1 İtme Çubuğu

Sürgülü sapı ile, oda tabanı kaydırırken veya çekerken çok kullanışlı yönlendirilebilir.

Bağlama ünitesindeki ayar kolunu gevşetdikten sonra, sürgülü tutamak bir açıyla ayarlanabilir.

Uzun sırt dayamalı koltuk sistemlerini çıkarmadan önce sürgülü terimi uzaklaştırmak gereklidir.

Sürgülü terimi çıkarmak için, bağlama ünitesini açın, çekmece fünyenin düğmesine basın ve kaydırma çubuğunu bağlama ünitesinden çıkarın.



22



23

7 İstifleleme

BASIC oda tabanı, koltuk tutucu su takılmış tek parça halinde taşınabilir.



Bakım notu!

Depolamadan önce oda tabanını iyice temizleyin. 9. noktanın altındaki bakım talimatlarına uyduklarına emin olun.



24

Ancak, sadece birkaç basit adım ile birkaç küçük paketler halinde BASIC oda tabanı sökmek mümkündür.

En küçük ambalaj boyutu koltuk tutucusu ve varsa sürgülü braketini çıkarılarak elde edilebilir.

8 Bakım, servis ömrü ve bakım

BASIC oda tabanınız CE işaretlidir. Üretici, bu tıbbi cihazın bir bütün olarak AB Direktifi 93/42/EEC'nin gerekliliklerine uygun olmasını sağlayacaktır.

Prensip olarak, brem-sen başta olmak üzere oda tabanının işlevselliği her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Kendi kendine kilitleme ile fındık sadece bir kez kullanılmalıdır. Birkaç gevşeme sonra, somunlar değiştirilmelidir.

Aşağıdaki listede açıklanan kullanıcı tarafından belirtilen aralıklarla yapılacaktır.

Sınav	faaliyetleri Günlük kalkıştan önce Aylık	Haftalık
Frenin fonksiyonel testi	X	
Koltuk yüksekliği ayarı test kelepçeleme	X	
Vida bağlantılarının test edilmesi		X
Tekerlekler ve rulmanlar gibi aşınma parçalarının görsel denetimi		X
Rulmanlarda kontaminasyonun görsel muayenesi		X
Kenar mekanizmasını test etme		X

Herhangi bir kusur bulursanız, bunları çözmek için yetkili satıcınıza başvurun.

Ayrıca yetkili satıcınız tarafından her 12 ayda bir düzenli bakım yapmanızı öneririz.

Hayat:

BASIC oda tabanının beklenen kullanım ömrü kullanım yoğunluğuna, bakım ve bakıma bağlı olarak 5 yıldır. Yetkili satıcı tarafından yıllık gözetim öneririz. Sandalyede arıza veya arıza olması durumunda, bu durum derhal ambulans servisine veya onarım için uzman satıcıya teslim edilmelidir.



Bakım

- Tüm çerçeve ve Plastik parçaları sadece hafif ev dedeler Adası temizleyin (kartal).
- Çoğu durumda, nemli bir bezle silme yeterlidir.
- Tuzlu suda faydası Yavuz.
- Mümkünse, kum veya diğer kir parçacıkları tekerleklerin yatak saldıran kaçının.
- Odanız ıslak olursa, tekrar kuruması önerilir.
- Saç veya kir parçacıkları genellikle direksiyon üzerinde birikir, hangi zaman içinde silindirler daha zor hale. Kiri çıkarın ve ruloları hafif bir ev temizleyicisi ile iyice temizleyin.
- Özellikle ilk zaman veya oda tabanında ayarlama çalışmasından sonra vida bağlantılarının mukavemeti kontrol edilmelidir. Bir vida bağlantısı tekrar tekrar gevşetilirse, lütfen ilgili satıcıya başvurun.

9 Geri dönüşüm ve bertaraf

BASIC oda tabanı geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır.

Ürün ambalajı ve tüm metal, alüminyum ve plastik parçalar geri dönüştürülebilir meblağ için kullanılabilir. Bertaraf, ilgili ulusal yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Lütfen yerel için şehir /belediye idaresi isteyin

Atık bertaraf şirketleri.

11 Özellikler

Tekerlek Ölçüsü*	75 mm	125 mm
Koltuk yüksekliği Koltuk tutucu MINI	510- 685 mm arası	580- 755 mm arası
Koltuk yüksekliği Koltuk tutucu boyutu 1 + 2	470- 645 mm arası	540- 715 mm arası
Ağırlık ***	9,4 kg	10,9 kg
Şasinin kütlesi (en ağır parça)	6,35 kg	7,87 kg
Oturma Açısı	0° ila + 32°	
Dönüş çemberi	870 mm	
Maksimum kullanıcı ağırlığı / taşıma yükü**	60 kg	
Uzunluğu	730 mm	
Genişlik	540 mm	
En küçük toplam yükseklik	600 mm	670 mm



Dikkat!

*Koltuk yüksekliği rulo çapına bağlıdır.



Dikkat!

**Aksesuarlar ve ekler, yolcu için kalan taşıma kapasitesinden azaltır.



Dikkat!

Ağırlık koltuk tutucu ile temel ekipman bir BASIC oda tabanı anlamına gelir Boyut 2.

HOGGI Ltd. Şti.
OSB Güldiken Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi No.16- 40100
Kırşehir- Türkiye (+49) 0 272 / 1224
www.hoggi.com.tr