



Kullanım Kılavuzu

CONFORM® Med. hava minder sınıf I tıbbi cihazlardır
(DE/CA/23/051/603NA01.01)

Garanti

Minder üzerindeki malzeme ve yapı kusurları için 2 yıl.



CE Beyanı:

Üretici, CONFORM® Med Hava Minderi Sistemlerinin Ek VIII, Bölüm III, paragraf 4.1 - Kural 1 uyarınca Sınıf 1 tıbbi cihazlar için 2017/745/EU Direktifi hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.



Wolff Kunststoffe GmbH
Industriestraße 28
69509 Mörlenbach
Almanya

USt-Id-Nr.: DE 144458680
GLN: 42 518157 0000 5
SRN: DE-MF-0000178949

Dağıtım– Türkiye Hoggi Rehabilitasyon Araç
Gereçleri ith. İhc. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
İvedik OSB Mah. Melih Gökçek Bulv.Eminel İş
Merkezi No18/1
06378 İvedik – Yenimahalle / Ankara
E-Mail: info@hoggi.com.tr
Cep Tlf. :(+90) 552 429 83 40
İş Yeri Tlf.: (+90) 312 394 45 69

Ürün Kapsamı

CONFORM® Med. Hava Minderi, kılıf, el pompası ve taşıma kutusu ile

Amaç

CONFORM® Med. hava minder, kalça bölgesinde basınç ülserlerinin (dekübit profilaksisi) önlenmesi için kullanılır ve mevcut basınç ülserleri durumunda terapötik destek için kullanılabilir.

Bu medikal koltuk minder, kalıcı olarak oturan (örn. parapleji, felç, ampütasyon, ALS [amyotrofik lateral skleroz], MS [multipl skleroz], spina bifida) veya hareket kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlı olan kişiler için uygundur.

Hava Minderi tekerlekli sandalyede koltuk minder olarak kullanılacaktır. Uygulama insanlar üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Wolff Kunststoffe GmbH tarafından CONFORM® Med. adıyla üretilen hava yastığı sistemleri mevcuttur

- 3 farklı yükseklikte (5, 7,5 ve 10 cm)
- 1, 2, 4 bölmeli minderler olarak
- merkezi bir valf ile 1 ve 4 odacıklı sistemler olarak kullanılabilir (tanımlama - C4)
- tüm yaygın tekerlekli sandalye oturma yüzeyleri için (boyutlar genişlik x derinlik)

Çalışma prensibi

Minder bir valf aracılığıyla hava ile doldurulur. Her bir hücre birbirine bağlı olduğundan, hava yastık içinde eşit olarak dağıtılır ve böylece yüksek düzeyde basınç tahliyesi sağlar. Minder hücreleri birbirine bastırıldığında, yıldız şeklindeki yapı nedeniyle birbirine kenetlenir ve birbirini destekler. Minderin dört köşesinde, minder tekerlekli sandalyeye bağlamak için tutucu kayışların veya Velcro kayışların çekilebileceği delikler vardır.

Kullanım talimatı

Bir CONFORM® Med. hava minder kullanımı kalifiye bakım personeli, rehabilitasyon danışmanı, tıbbi ürün danışmanı, mesleki terapist tarafından gerçekleştirilmelidir. Minder hastanede reçete edilir ve orada teslim edilirse, kullanıcının, aile çevresinin veya ayakta tedavi bakımının ürünün kullanımına aşina olması sağlanmalıdır. Uygulama süresi zaman kısıtlaması olmadan Yeniden kullanım güvenlik talimatlarına bakın

Temizlik

Özel ortamda - Yastığın dezenfeksiyonu, yüzeyin yaygın dezenfektan spreyler veya dezenfektan mendillerle temizlenmesiyle yapılır (yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda hijyen için <https://edoc.rki.de/handle/176904/224>-Anforderungen ve ayrıca <https://www.rki.de> - yüzey dezenfeksiyonu listesi). Minderler ve minder kılıfları maksimum 60°C sıcaklıkta çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Standart olarak, 40°C'ye kadar yumuşak döngüde yıkamanızı öneririz (sıkma yapmadan, vanaları kapattığınızdan emin olun!). Bu, günümüzün dezenfektan deterjanlarıyla (Sagrotan veya benzeri) hijyenik temizlik sağlar.

Kamu tesislerinde/hastanelerde - Yastık, yüzey yaygın dezenfektan spreyler veya dezenfektan mendillerle temizlenerek dezenfekte edilir (<https://edoc.rki.de/handle/176904/224> - Yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için hijyen gereklilikleri ve <https://www.rki.de> - Yüzey dezenfeksiyonu için liste). Yastık ve yastık kılıfı daha sonra çamaşır makinesinde 40° - 60°C'de yıkanır. Eltra deterjanını tavsiye ederiz. Eltra 40 plus deterjanını (üretici: Ecolab) tavsiye ediyoruz. Bir diğer temizlik seçeneği de Ecolab Ozonit ve Turbo Emülsiyon ile 60°'de kemo-termal dezenfeksiyondur.

Kullanım Talimatları

Tedarik edilen pompayı hortum bağlantısını kullanarak CONFORM® Minderin valfine bağlayın.

Vidalı tapayı sola çevirerek valfi açın ve yastığa hava pompalayın.

Ardından saat yönünde çevirerek vanayı kapatın.
Şimdi minder hava ile doldu.




Şimdi kullanıcı CONFORM® minderinin üzerine yerleştirilir, tabii tüm şişirme işlemi zaten oturanın altında gerçekleştirilmediyse.

Lütfen kullanıcının kolçağın üzerinden yana doğru devrilmediğinden emin olun.


Şimdi, optimum basınç tahliyesini elde etmek için kişinin minderine içine mümkün olduğunca derine batabilmesi için minderden hava çıkmalıdır.

Minderden hava çıkmasını sağlamak için valf tekrar açılmalıdır. Ancak, çok fazla hava kaçmadığından emin olun.

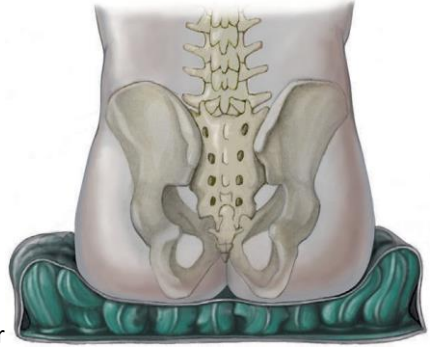

En iyi basınç tahliyesi, oturanın en alt noktası (genellikle iskiyal tüberositler veya koksiks) ile taban plakası arasındaki mesafe yaklaşık 2 cm olduğunda elde edilir.

Bu, bir elin iskiyal tüberositlerin veya kuyruk kemiğinin altına kaydırılmasıyla kontrol edilebilir (önden veya yandan). Parmak uçlarınızı yaklaşık 1,5 - 2 cm aşağı hareket ettirebiliyorsanız, yastık en iyi şekilde ayarlanmış demektir.

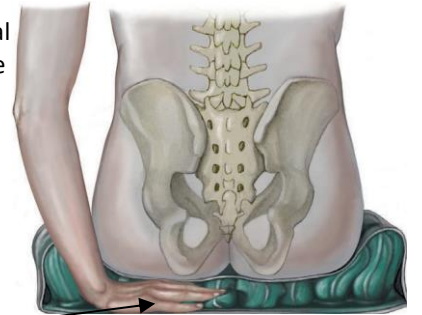

El, minderin üst kısmı (kılıfın üstü) ile kalça arasında yaklaşık 1,5 - 2 cm

Güvenlik talimatları

Performans özelliklerindeki değişiklikler üreticiye ve distribütöre bildirilmelidir.

Kullanım Ömrü - Tıbbi Cihazlar Direktifi, bir tıbbi cihaz üreticisinin güvenli kullanım olarak adlandırılan süreyi belirtmesini şart koşturmaktadır. Böylece yasal bir gerekliliği yerine getiriyor ve resmi nedenlerden dolayı satın alma tarihinden itibaren üç yıllık bir süre belirliyoruz. Belirtilen sürenin, kullanıcı tarafından olası gerçek kullanım veya maksimum kullanım süresi ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Kullanım - Yastığı her zaman kılıfı üzerindeyken kullanın. Minderin doğası gereği, hava dolu hücrelerin kılıf tarafından formda tutulmasını sağlamak mümkün değildir.

Şişirme prosedürü - Yastığı sadece birlikte verilen el pompası ile şişirin. Elektrikli pompalar veya kompresörler yastığa aşırı basınç uygulayarak patlamasına neden olabilir. Lütfen yastığın valfini pense ile açmayın. Bu, valfin sıkışmasına, aşırı sıkılmasına veya bükülmesine neden olabilir.

Kullanıcı ağırlık sınırlaması - yok.

Yanan kıl - Yastık kılıfı alev geciktirici kaplamaya sahiptir. Köz ile temas etmesi durumunda yine de zarar görebilir.

Evcil hayvanlar - Evde evcil hayvan varsa, lütfen onların (özellikle kemirgenlerin ve kedilerin) mindere zarar vermediğinden emin olun.

Minderde hava olup olmadığının kontrol edilmesi - Minderin hala hava ile dolu olup olmadığı günde bir kez kontrol edilmelidir. İçinde genellikle 8-21 gün sonra hava ile yeniden doldurulması gerekir.

Depolama - Doğal kauçuk, erken yaşlanma süreçlerine neden olduğu için güçlü güneş ışığına (UV ışığı) maruz bırakılmamalıdır. CONFORM® minder kullanılmadığında, sağlanan taşıma kartonunda saklanması önerilir.

Minderde delik - Hava kaybı minderdeki kusurlu bir noktadan kaynaklanıyorsa, lütfen minder tedarikçisiyle iletişime geçin. Bununla birlikte, ekteki onarım kitini (Almanya içinde minder teslimatıyla birlikte verilir) kullanarak minderleri kendiniz onarmakta da özgürsünüz.

Hava kaybı - Bir minderin havasının tamamen inmesi durumunda, tekrar şişirin ve önce valfin yanlışlıkla açılıp açılmadığını kontrol edin. Valf doğru şekilde kapalı olmasına rağmen minder hava kaybediyorsa, minder tedarikçisi (tıbbi malzeme mağazası/uzman bayi) ile iletişime geçin.

Yastık için bakım ürünleri - Bakım ürünleri gerekli değildir.

Tekerlekli sandalyenin koltuk genişliği ve derinliğine en uygun adaptasyon - Minderin koltuk genişliği ve derinliği tekerlekli sandalyeye en uygun şekilde adapte edilmelidir. Minder çok büyükse, tekerlekli sandalye üzerindeki sürtünme hasarlı bir alana neden olabilir. Çok küçükse, kullanıcı için optimum basınç tahliyesi sağlamayacaktır.

Hasta değişimi - Minderin kullanım için başka bir kişiye verilmesi durumunda, görünürde herhangi bir kirlenme olmasa bile minder ve kılıf temizlenmelidir. Hijyenik açıdan kapak değiştirilmelidir.

Temizlik - Hücrelerin birbirine yapışmasına neden olabileceğinden maksimum yıkama sıcaklığı olan 60° aşılmalıdır. Minderin UV sterilizasyonu ile temizlenmesi mümkün değildir; bu tür bir temizlik (UV ışığı) minder malzemesine zarar verir.

Deterjan - Kullanılan deterjan silikon yağı içermemelidir, çünkü bu, minder malzemesinin gözenekli hale gelmesine neden olabilir gözenekli hale gelir.

Koltuk minderi - üst ve alt - Minderin düz alt plakasının tekerlekli sandalyeye yerleştirildiğinden emin olun. yerleştirilir. Kullanıcı üst tarafa (çıkıntılara) oturur.

