
HOGGI®



BINGO Evolution Kullanım kılavuzu

Tr

Rehab puset için kullanım kılavuzu BINGOEvolution

1	Model tanımlama ve temel yapılandırma	
11	Model tanımlaması (etiket)	4
12	Temel yapılandırma	4
2	Ortak bilgi	
21	önsöz	5
22	Uygulama	5
23	Uygunluk beyanı	5
24	Garanti şartları	5
25	Servis ve onarımlar	5
3	Güvenlik talimatları	
31	Sembollerin anlamı	6
32	Genel güvenlik talimatları	6
4	Teslimat ve kullanıma hazırlanma	
41	Teslimat ve kullanıma hazırlanma	11-19
5	Ayarlama ve adaptasyon olanakları	
51	Tekerlek kilidi	19
52	İtme kolunun yükseklik ayarı	20
53	Koltuk derinliği ve koltuk genişliği	20
54	Aksesuarlar için tutucu	21
55	Kalça destekleri	21
56	Yan destekler	21
57	Uyluk destekleri	22
58	Arka yüksekliği	22
59	Yaslanmak	23
510	Ayaklık askısı, açısı ayarlı	23
511	Ayak dayama askısı, 90 °	23
512	Alt bacak uzunluğu	24
513	Ayak dayama açısı	24
514	Ayaklık çevirme kilidi	24
515	Koltuk ünitesinin sökülmesi ve takılması	24
516	Sürüş yönünün aksine koltuk ünitesi	26
517	eğim	26
518	Çabuk açılan tekerleklerin sökülmesi	27
519	ASF - Uyarlamalı süspansiyon sistemi	27
520	Pnömatik lastikler	27
6	Aksesuarlar	
61	Döner kilit	28
62	Yumuşak aksesuar çantası	28
63	Büyük aksesuar çantası	29
64	Koltuk başlıkları	30
65	Koltuk başlıkları (düşük versiyon)	31
66	Koltuk başlığı braketleri „evrensel“	31
67	Oksiput döşemeli koltuk başlığı	32
68	Toraks yastıkları	32
69	Pelvik üzengi	33
610	4 noktalı kucak kemeri	34
611	Beş noktalı emniyet kemeri	34
612	Ayak kayışları	36
613	Ayak bileği sırtı	36
614	Kasık askısı	36
615	Sabitlenme ceketi	38
616	Göğüs-omuz kemeri	39
617	Kaçırma bloğu	40
618	Döşemeli tutma rayı	41
619	Terapi tepsisi	41
620	Aksesuarlar, tutma rayı veya terapi tepsisi tutucu	42
621	Kışlık ısıtıcı	42
622	Koyun derisi eki	43
623	Yağmur pelerini	43

624	Kanopi dahil. adaptör ve yağmurluk	43
625	Görevli freni	44
626	Kampanalı fren	45
627	Aksesuar ve bebek bezi çantası	46
628	Güneşlik	46
629	Aksesuar ve bebek bezi çantası	46
7	Ulaşım	
71	Bir arabanın bagajında	46
72	Otobüs taşıma için rehabilitasyon pusetinizi kullanma	47
8	Bakım / Servis ve Onarım ve çalışma ömrü	
81	Bakım / Servis ve Onarım ve çalışma ömrü	50
82	Çalışma ömrü	50
9	Özellikler	
	Ataşmanlar ve aksesuarlarla ilgili tüm özellikler ve notlar	51

Model tanımlama

Mobilite tabanı etiketi, sol yan takviyenin içine monte edilmiştir. Koltuk ünitesi etiketi koltuk arkalığının arkasına yapıştırılmıştır.

Yedek parça sipariş ederken, sorunsuz bir teslimat sağlamak için lütfen seri numarasını belirtin.

 HOGGI GmbH Eulerstraße 27 D-56235 Ransbach-Baumbach MADE IN GERMANY	3234-1000-024 BINGO Evolution Straßengestell Gr. 2 Lenkräder, vorne  Max. load: 60 kg 	 201535174 SN	Renk kodu Malzeme numarası Boyut Seri numarası CE etiketi
 HOGGI GmbH Eulerstraße 27 D-56235 Ransbach-Baumbach MADE IN GERMANY	3234-2000-024 BINGO Evolution Sitzeinheit Gr. 2  Max. load: 50 kg 	 201535175 SN	Sınıflandırma / Ürün adı Maksimum yük / yük kapasitesi
 HOGGI GmbH Eulerstraße 27 D-56235 Ransbach-Baumbach MADE IN GERMANY	3234-2000-024 BINGO Evolution Sitzeinheit Gr. 2  Max. load: 50 kg 	 201535175 SN	Üretici firma Üretim yeri Üretim yılı

Temel yapılandırma şunları içerir:

- Bingo EVO rehabilitasyon puseti (mobilite tabanı ve koltuk ünitesi)
- Ön ve arka tekerlekler, hava veya PU lastiklerle
- Dolgu (IPS)
- Uyluk destekleri
- Ayaklık askısı
- Ayak desteği braketi ve ayak dayama yeri

2 Genel Bilgi

2.1 önsöz

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu yüksek kaliteli ürünü hayatınızı daha güvenli ve kolay hale getirmek için tasarladık ve bu kılavuzu kullanmanıza ve bakımını yapmanıza yardımcı olmak için ekledik. Bu ürünü önerilen şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen aşağıdaki talimatları okuyun. Başka sorunuz varsa veya herhangi bir sorunuz varsa lütfen sağlık uzmanınıza başvurun.

BINGO Evolution'ın beklentilerinizi karşıladığını umuyoruz. Bu kılavuzda belirtilen modelle ilgili teknik değişiklikler yapmaktayız. Tekerlekli sandalyeyi ilk kez kullanmadan önce, bu kılavuz rehabilitasyon pusetiyle güvenli bir kullanım sağlamak için hasta ve destek personeli tarafından okunmalı ve anlaşılmalıdır.

2.2 Uygulama

Rehabilitasyon arabaları, pediatrik postüral konumlandırma sistemleri veya bebek arabaları çocuk için uygundur. Yürüyemeyen veya yürüme engeli olan ve bu nedenle hareketlilik yardımı gerektiren ergenler. Aşağıdaki nedenlerle yardım gerekebilir:

- Atipik kas tonusu
- Ekstremitte kaybı (dismelia/alt ekstremitte amputasyonu)
- Uzuv kusuru ve / veya deformitesi
- Ortak sözleşmeler
- Eklem kusurları
- Genel zayıflık

BINGO Evolution rehabilitasyon puseti iç ve dış mekanların yanı sıra daha fazla hizmet için de kullanılabilir. Daha fazla hizmet için ürünün verimli bir şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir. Daha sonra ürünün yetkili bir teknisyen tarafından durum, dokuma ve hasar açısından kontrol edilmesi gerekir. Tüm hasarlı ve uygun olmayan parçaların değiştirilmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis kılavuzuna bakın.

2.3 Uygunluk beyanı

HOGGI GmbH, tek sorumluluğu bulunan üretici olarak rehabilitasyon puseti BINGO Evolution'ın 93/42 / EEC Kılavuzlarının (MDD 2007/47 / EG değişikliklerini de göz önünde bulundurarak) karşıladığını beyan eder. Geçerli uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır.

2.4 Garanti Koşulları

Garanti, yalnızca ürün belirtilen koşullara uygun olarak ve amaçlanan amaçlarla, tüm üreticinin tavsiyelerine uyulduğunda geçerlidir. Üretici tarafından onaylanmayan bileşenlerin ve yedek parçaların neden olduğu hasarlardan üretici sorumlu değildir. Ayrıca şu şartlar ve koşullar için § 8'e bakınız: www.hoggi.de

2.5 Servis ve onarımlar

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinin servis ve onarımı yalnızca yetkili HOGGI bayileri tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, lütfen BINGO Evolution ürününü sağlayan satıcıyla bağlantı kurun. Yetkili satıcılar yalnızca orijinal HOGGI yedek parçalarına uyar.



Hazırlama, onarım ve servis için aşağıdaki aletler gereklidir:
Alyan anahtarı, ebat: 3 mm, 4 mm, 5 mm ve 6 mm
Vida anahtarı, boyut: 10 mm, 13 mm, 19 mm ve 24 mm

3 Güvenlik talimatları

3.1 Sembollerin anlamı



Dikkat!
Olası kaza ve yaralanma tehlikesine karşı uyarı. Olası teknik hasara ilişkin uyarı.
Olası teknik hasara ilişkin uyarı.



Bilgi!
Ürün kullanımı hakkında.



Bilgi!
Servis personeli için.



Dikkat!
Kullanmadan önce kılavuzu okuyun!

3.2 Common safety instructions



Kullanmadan önce kılavuzu tamamen okuyun! Kullanmadan önce ürünün kullanımı ve işlevleri hakkında bilgi edinin ve çeşitli işlevleri uygulayın. Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu kılavuzdaki talimatlara uymazsanız, çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir. Bununla birlikte, olası tüm durumlar ve öngörülemeyen durumlar bu kılavuzda ele alınamaz. Sebep, bakım ve ihtiyat, ürünün özellikleri değildir, ürünü kullanan kişilerden istenir. Ürünü ve aksesuarlarını kullanan kişi, tüm talimatları anlamalı ve ürünü ve aksesuarlarını kullanan herkese açıklamalıdır. Talimatlar net değilse ve daha fazla açıklama yapılması gerekiyorsa veya başka sorularınız varsa lütfen HOGGI satıcınıza başvurun.



Çocuğunuz, tekerlekli sandalyedeyken daima askıya alın.



HOGGI, tipik kullanımın yanı sıra her türlü kullanım tehlikeli olabileceğine işaret eder. Rehabilitasyon puseti koşu, koşu, paten veya benzeri aktiviteler için uygun değildir. Dönebilen ön tekerlekler daha yüksek hızda yalpalama eğilimindedir, bu da ani bir durmaya ve puset üzerinde devrilmeye neden olabilir. Bebek arabasını sadece normal yürüyüş hızında kullanın. Hiçbir koşulda itme sırasında gidonu bırakmayın ve sandalyeyi asla uzağa itmeyin.



Bebek arabası sadece düz zeminde kullanılmalıdır.



Pusetinizi üreticinin istediği şekilde kullanın. Örneğin, fren yapmadan engellere (basamaklar, bordürler dahil) girmeyin.



Basamaklar ve bordürler gibi engelleri temizlemek için, puseti arka tekerleklere yatırın (yukarı gitmek için geriye doğru çekin; inmek için yavaşça öne doğru indirin).



Başka bir kişinin yardımı olmadan merdivenlerden yukarı veya aşağı gitmeyin. Rampalar veya asansörler gibi cihazlar varsa lütfen bunları kullanın. Mevcut değilse, puset iki kişi tarafından engelin üzerinden taşınmalıdır.



Aşağıdakileri önlemek için yamaçlarda ve meyilli yerlerde özellikle dikkat edin:

- çocuğun pusetten düşmesi
- bebek arabasının devrilmesi
- bebek arabasının kayması



Bebek arabasını sadece sağlam bir şekilde takılmış parçalardan kaldırın:

- ön tekerleklerin üstünde ön çerçeve borusu
- Ön aks
- itme kolu



Eğer bir yokuşta park etmek zorunda kalırsanız, frenler takılıyken bebek arabasını yokuş yukarı bakacak ve koltuğun dik konumda olduğundan emin olun. Koltuk eğimli konumdaysa, pusetin geriye doğru eğilmesi riski vardır.



Pusetten ayrılmadan önce ve içeri girip çıkmadan önce daima tekerlek kilitlerini kilitleyin.



Çocuğunuz öndeki, pusetin yanına veya arkasındaki nesnelere ulaştığında, yerçekiminin ortasındaki kayma pusetin eğilmesine veya devrilmesine neden olabileceğinden pusetten fazla eğilmediğinden emin olun.



Bebek arabasının kullanımı lastik basıncından büyük ölçüde etkilenir. Lastikleri doğru şekilde şişirmek, manevra kabiliyetini önemli ölçüde artırır. Hava basıncı en az 2 bar olmalıdır (200 kPa ve 29 PSI).



Belirli ayak dayama yeri ayarlarında ayak dayamasının tekerleklerle çarpışabileceğini lütfen unutmayın.



Lütfen ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Plastik ambalaj boğulma tehlikesi yaratır



Çocuğunuzu, kayış takılıyken ve frenler takılıyken bile asla gözetimsiz bırakmayın.



Karanlıkta, kullanıcı iyileştirilebilirliği artırmak için hafif giysiler veya reflektörlü giysiler giymelidir. Takılıysa reflektörlerin kolayca görülebildiğinden emin olun. Ayrıca aktif aydınlatma takmanızı öneririz.



Puseti kullanmadan önce, hem katlanır korumalar hem de koltuk yerine sıkıca oturmalıdır.



Statik kararlılık 10,5 ° eğimdedir.
İtme kollarına ağır poşetler veya başka bir ağırlık takmak dengeyi olumsuz etkileyebilir.



Dikkat!
Özel olarak, yassılığın ayarlanması sırasında, boşluk fonksiyonundaki eğim ve ayak dayama askısı, kolların veya bacakların esnek parçalarına çıkarak çocuk için yakalanma tehlikesini ortaya çıkarır BINGO evrimi.



Ayak dayama yerini genellikle tekerlekli sandalyeye girip çıkmak için kullanmayın. Ayak desteğini sadece ayakkabı ile kullanın.



Rehabilitasyon puseti, bir seferde sadece bir çocuk taşımak için tasarlanmıştır.



Atıkların bertarafı: Metal, alüminyum ve plastik parçalara kadar ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm ulusal ve yasal şartlara göre yapılmalıdır.



Aksesuar çantalarında taşınabilecek maksimum ağırlık 3 kg (model "yumuşak") veya daha doğrusu 8 kg'dır (model "büyük"). Tepsilere 5 kg'dan ağır nesneler yüklenmemelidir.



Dikkat!

Tüm döşemeler neredeyse yanıcı değildir ve EN 1021 bölüm 1 (sigara testi) ve bölüm 2 (eşleşme testi) iddiasını karşılamaktadır. Ancak bu, koltuk ünitesindeki kullanıcıyı, yangını veya ateşle dikkatsizce tutarak yanıklara maruz kalması için korumaz.



Katlanmış durumda saklamak için taban çerçevesini şarj etmeyin (bağlama kiti monte edilmişse).



BINGO Evolution mobilite tabanı için maksimum yük 60 kg'dır.
BINGO Evolution koltuk ünitesi için maksimum yük 50 kg'dır.
BINGO Evolution Mini koltuk ünitesi için maksimum yük 25 kg'dır.



Aksesuarlar ve eklentiler maksimum yükü orantılı olarak azaltır.



Kaza durumunda yolcuların mümkün olan en iyi şekilde korunmasını sağlamanın tek yolu budur, mümkün olan her yerde ve her ne zaman kullanıcıların motorlu taşıtta bulunan koltuklara aktarmalarını ve ilgili araç emniyet sistemlerini kullanmalarını öneriyoruz.

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetiniz ANSI / RESNA WC / 19 ve ISO 7176/19 (Crashtest) uyarınca başarıyla test edildi. Bununla birlikte, eğer "Bağlama Kiti" (madde 3231-7300) ve uygun emniyet sistemleri kullanılıyorsa, BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinizi bir motorlu taşıtta koltuk olarak kullanmak mümkündür. BINGO Evolution ürününüz henüz bir motorlu taşıtta koltuk olarak kullanılmak üzere Kabul edilmiştir.

Bu rehabilitasyon puseti arka açılı ve koltuk eğim ayarı ile donatılmıştır. Koltuk arkalığındaki açma / kapatma kolunu çevirin ve koltuk arkalığını ilk konuma getirin. Koltuk yatırma ayarını kullanarak koltuk arkalığını neredeyse dik konuma getirmelisiniz (maks. 20 °). Bu kullanım kılavuzunda 5.9 ve 5.17 altındaki teknik özelliklere uyun.



CDİKKAT! BINGO Evolution Mini için önemli not:

BINGO Evolution Mini henüz bir motorlu araçta koltuk olarak kullanılmamaktadır. Uluslararası ISO 7176/19 standardına göre çarpışma testi BINGO Evolution Mini için geçerli değildir



Dikkat!

Aksesuarlardaki aşırı kayış uçları eğim mekanizmasına sıkışmış olabilir ve kilitleme pimlerinin takılmasını önleyebilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir.

Aksesuarlar üzerindeki fazla kayış uçlarını sıkışmayacak şekilde kısaltın. Koltuğu, koltuk ünitesinin düzgün şekilde yerine oturduğunu keskin bir şekilde öne doğru çekerek kontrol edin.

Kilitleme pimlerinin tamamen yerine oturduğunu kontrol edin. Gerekirse tamamen içeri itin.



Bir koltuk kabuğunun montajına sadece belirtilen oturma alanı içinde izin verilir. Bu yeni ürün kombinasyonunun üreticisi, devreye almadan önce maksimum yükün kararlılığını ve bağlılığını test etmek zorundadır.



Ne maksimum koltuk derinliği ne de maksimum sırt yüksekliği aşılmamalıdır (bkz. Bölüm 9).



Lütfen görme engelli kişilere kılavuzu ve bilgi materyallerini okuyun - veya elektrikli aletler kullanın. Lütfen tüm BINGO Evolution belgelerini www.hoggi.de web sitemizden indirin veya okuyun. Ayrıca, ürün videoları ve ürün fotoğraf galerileri çevrimiçi olarak mevcuttur!



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, BINGO Evolution'da, gevşetilmiş tüm vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.



Ambalaj hasar görürse ürünün durumunu kontrol edin.



Aşırı sıcaklıklarda dikkatli olun. Tekerlekli sandalye güneşte veya saunada önemli ölçüde ısınabilir. Aşırı soğukta hipotermi riski vardır. Duyarsız cildi (yani sıcaklık artışını algılayamayanlar) ve / veya cilt hasarı olan kişiler için, metal parçaların çok yüksek bir sıcaklığa ulaşmamasına dikkat edilmelidir. Bu durumlarda, cildi korumak için uygun giysiler giymek zorunludur.



HOGGI koltuk minderi (Trevira CS) ve konturlu koltuk minderi (Trevira CS) ve HOGGI naylon sırtlık ve koltuk kılıfı EN 1021-1 ve EN 1021-2 normuna göre aleve dayanıklıdır. HOGGI tarafından sağlanan veya ilave dolguda kullanılan orijinal gibi diğer yastıklar ve sırt yastıkları kullanıldığında, alev geciktirici etki verilmez.



Her zaman arka tekerleğin hızlı açılan bağlantısının doğru şekilde oturduğundan emin olun.



4 Teslimat ve Kullanıma Hazırlanma

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetiniz normalde tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilecektir. Tahtada teslimat: Yaklaşık 880 mm (U) x 700 mm (G) x 400-450 (Y)

Ambalaj hasar görürse lütfen ürünün durumunu kontrol edin. Lütfen taşıma kilitlerini ve taşıma ambalajını dikkatlice çıkarın.



Orijinal paket aşağıdaki parçaları içerir:

- M Mobilite tabanı, katlanmış
- Koltuk ünitesi ve arkalık, katlanmış
- Koltuk, arkalık, kalça ve yan döşeme
- Sipariş edilen aksesuarlar
- (Bunlar yetkili bir satıcı tarafından rehabilitasyon pusetine monte edilmelidir)
- Gerekli talimatlar ve araçların listesi



BINGO Evolution'ı açmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- Sol ön çerçevedeki açılmış emniyet mandalını serbest bırakın (ayrıntılı resim).
- Puseti kaldırmak için itme çubuğundaki siyah tutamak tutamağını kullanın ve tekerlekleri üzerine oturanı kadar açın.
- Katlanır muhafazalar ısıtılabilene kadar itme çubuğunu geriye doğru bastırın.
- Katlanmayı, muhafazaları kontrol edin ve gerekirse takın



- Hızlı serbest bırakma parçasını gösterildiği gibi bastırın ve arka tekerleği arka aksa yerleştirin.
- Ters yönde çekerek tekerleklerin aksı saptırmasına sabitlendiğinden emin olun.
- Aynı işlemi karşı tarafta da yapın.



- Koltuk bağlantılarındaki her iki taşıma kilidini (kablo bağları) bir makas veya el işi bıçağıyla dikkatlice kesin (ayrıntılı resim).
- Koltuk arkasını çekiniz ve dikiniz.



- Görevli fren üzerindeki taşıma kilitlerini (kablo bağları) dikkatlice kesin.



- Koltuk arkalığının açma / kapatma kolunu çevirin ve koltuk arkalığını ilk konuma getirin



- Resim veya işareti, ilk arka aç konumunda kilitli koltuk arkalığını gösterir.



BINGO Evolution Mini:

- Arka çubuktaki serbest bırakma kayışını gösterildiği gibi çekin ve koltuk arkalığının ilk konuma geçmesini sağlayın (ayrıntılı resim).



- Çizimde veya işareti, ilk arka aç konumunda kilitlenmiş sırtlığı gösterir..



- Şekilde, koltuk arkılığı ile BINGO Evolution ve eğim işlevi ilk konuma getirilmiş olarak gösterilmektedir.



- Aktif kolu çektikten sonra koltuk ünitesinin açısı ayarlanabilir.



BINGO Evolution Mini:

- Başparmak koluna bastıktan sonra koltuğun açısını ayarlayabilirsiniz birimi.



BINGO Evolution ürününüzde açılı ayarlı ayak dayama askısı varsa ayak dayama yeri taşıma için menteşeli bir konumda olabilir

- Ayak dayaması askısını ayak dayaması istenen pozisyonda olacak şekilde döndürün ve sıkıştırma kolu ile sıkıca kelepçeleysin.



BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinizde 90 ° ayak dayama askısı varsa ayak dayama yeri taşıma için menteşeli bir konumda olabilir.

- Ayak desteğini aşağıya doğru döndürün, kilitleme pimini çekin ve ısıtılabilmesini sağlayın.
- Kilitleme piminin sağlam bir şekilde yerleşip yerleşmediğini ayak dayama askısına keskin bir itme ile kontrol edin.



BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinizde uyluk varsadestekler lütfen aşağıdaki gibi devam edin:

- Uyluk desteklerini koltuk plakasında istenen konuma yerleştirin.
- İki kovan civatasını yukarıdan gösterildiği gibi takın.
-



- Her iki koç civatasını gösterildiği gibi koltuk panelinin alt tarafındaki kelebek somunlarla sabitleyin.



- Her iki vida bağlantısını da gösterildiği gibi bir Biloc somunuyla sabitleyin
- Aynı işlemi karşı tarafta da yapın.

Rehabilitasyon pusetinizde kalça destek döşemesi varsa, lütfen aynı şekilde devam edin.



BINGO Evolution Mini:

- Kalça desteklerini (solda) gösterildiği gibi braketlerin (solda) üzerine yerleştirin.
- Aynı işlemi karşı tarafta da yapın.



BINGO Evolution Mini:

- Resim sol kalça desteğini göstermektedir.



BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinizde kafalık yastıkları (düşük versiyon) varsa lütfen aşağıdaki şekilde devam edin:

- Koltuk başlığı, koltuk arkılığı plakasının önünden istenen konuma yerleştirin. • İki kovan civatasını önden gösterildiği gibi takın.



- Her iki koç civatasını da gösterildiği gibi koltuk arkılığı plakasının arkasındaki tırtıllı somunlarla sabitleyin.



- Her iki vida bağlantısını da gösterildiği gibi bir Biloc somunuyla sabitleyin. • Aynı işlemi karşı tarafta da yapın.

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinizde koltuk başlığı (yüksek versiyon) varsa lütfen aynı şekilde devam edin.



Yanal destekler, küçük bir paket boyutu elde etmek için taşıma için ayrılabilir.

- Yan destekleri gösterildiği şekilde koltuk arkılığı borularına takın.



- Resimde sol taraftaki destek takılıyken BINGO Evolution gösterilmektedir.



Döşemeyi bağlamadan önce koltuk ünitesini istenen konuma ayarlamanızı öneririz. (Arka yatırma ve koltuk yatırma - bkz. Bölüm 5).

- Koltuk minderini koltuk panelinin üzerine yerleştirin ve gösterildiği gibi ön koltuk kenarının altındaki mandallarla koltuk paneline sabitleyin.



- Koltuk minderini, tırnakları gösterildiği gibi arka koltuk kenarının altındaki koltuk paneline takın.



- Uyluk desteklerinin döşemesini önden başlayarak gösterildiği gibi çekin, böylece yastıklı taraf iç tarafa bakacak ve Velcro bağlantı elemanları ile sabitlenecektir.



- Şekilde döşemelik dahil sol yerleştirilmiş uyluk destekleriyle BINGO Evolution gösterilmektedir.



- Kalça yastığının pedini gösterildiği gibi çekin. Önden başlayarak ve Velcro bağlantı elemanlarını kalça yastığı ve bağlı halka bandının içine sabitleyin.



- Şekilde, döşemeyi de içeren kalça desteği bulunan BINGO Evolution Mini gösterilmektedir.



- Baş desteğinin döşemelerini, pedleri (düşük versiyon) gösterildiği gibi alttan başlayarak çekin, böylece yastıklı taraf iç tarafa işaret eder ve fermuarı kapatır.



- Şekilde dolgu dahil bağlı kafalık yastıkları ile rehabilitasyon arabası gösterilmektedir.



- Yan destek döşemesini braketin üzerine çekin, böylece yastıklı taraf iç tarafa bakacak ve Velcro bağlantı elemanları ile sabitlenecektir.



- Resimde yan destekli BINGO Evolution gösterilmektedir.



BINGO Evolution Mini:

- Daha kolay takmak için, altlığın fermuarı açın ve solu sağdan ayırın.
- Halkayı içeriden ön yuvadan geçirin ve öne doğru getirin.
- Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.



BINGO Evolution Mini:

- Ayarladıktan sonra yastığı yan pedlerin üzerine koyun ve ardından her iki yarıyı da bağlayın ve fermuarı kapatın.



BINGO Evolution Mini:

- Resimde ekli koltuk minderi gösterilmektedir.



BINGO Evolution cihazınızda bir kanopi varsa, kontrol etmenizi öneririz, bölüm 6.24.

- Rehabilitasyon arabasının arkasında veya yanında durun. Koltuk arkılığı döşemesini kapakla birlikte koltuk arkılığına doğru çekin ve Velcro bağlantı elemanları ile üzerine sabitleyin.
- Koltuk arkılığı döşemesinin alt ucunu koltuk arkılığı ve koltuk arasına yerleştirin.
- Velcro bağlantı elemanlarını gösterildiği gibi uzun delikten geçirin ve sabitleyin.





- Şekilde sabit bir sırtlık döşemesi (arkadan görünüm) gösterilmektedir.



Rehabilitasyon arabasını katlamak için BINGO Evolution şu şekilde devam eder:

- Katlamadan önce daima eşlik eden fren ile BINGO Evolution'ı sağlayın.

kompakt katlama paketini elde etmenizi öneririz:

- oturma açısını 0 ° pozisyonuna getirmek için (bkz. 5.17)
- yan destekleri katlamak veya ayırmak için (bkz. 5.6)
- kalça desteklerini bırakmak (isteğe bağlı (bkz. 5.5)



- ayak dayama askısını yukarı kaldırmak için (bkz. 5.10 veya 5.11) ve ayak dayamasını yukarı döndürmek için (bkz. 5.13).
- Puşun arkasında durun. Her iki katlama koruyucusunu da çekin ve itme çubuğunu öne doğru itin.
- Her iki katlama koruyucusunu etkinleştirdikten sonra basma çubuğunun üzerinde bulunur. İtme çubuğunu öne doğru katlayın ve katlama işlemi sırasında BINGO Evolution yere katlanana kadar tutmaya devam edin.
- Koltuk arkalığını gösterildiği gibi katlayınız (bakınız 5.9).



- BINGO Evolution Mini'yi katlamadan önce, döşemeyi korumak için koltuk arkalığını geriye doğru katlamanızı öneririz.



5 Ayarlama ve adaptasyon olanakları

5.1 Tekerlek kilidi

- Tekerlek kilidini takmak için tekerlek kilit kolunu aşağıya doğru itin ve puseti hafifçe öne veya arkaya doğru döndürün, böylece kilit pimleri fren diskine girebilir.



- Tekerlek kilidini açmak için tekerlek kilit kolunu parmağınızla yukarı doğru çekin.



5.2 İtme çubuğunun yükseklik ayarı.

Cırcırlı bağlantılar itme kolunun uygun bir yüksekliğe ayarlanmasına izin verir. Cırcırlı eklemleri çalıştırmak için itme kolunun dışındaki düğmelere basın.




5.3 Koltuk derinliği ve koltuk genişliği

İşaretli vida bağlantılarını gevşetip çıkardıktan sonra (her iki tarafta) koltuk plakasını kaydırmak mümkündür. Yüksek stabilite için vida bağlantıları birbirine geniş bir mesafede olmalıdır




Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.

Koltuğun altındaki kanat somunlarını gevşettikten sonra, kalça desteklerini sırasıyla uyluk desteklerini kaydırarak koltuk genişliğini sürekli olarak değiştirmek mümkündür.

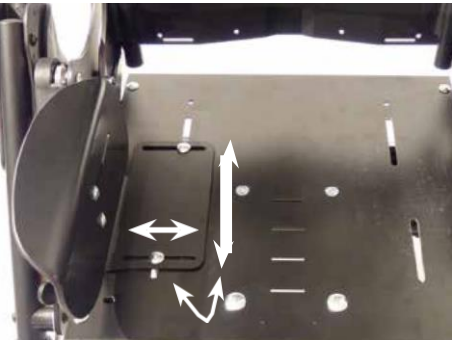

Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.

Resimdeki oklar kalça desteklerinin ayar imkanlarını göstermektedir. Bunlar genişlik, derinlik ve açı olarak ayarlanabilir.

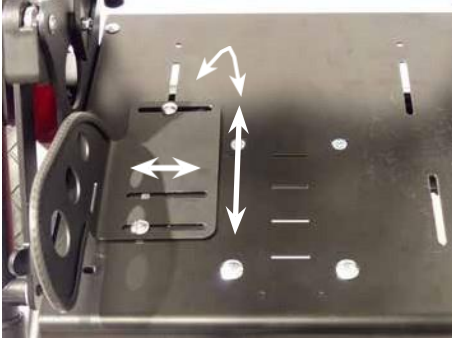

Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.

Resimdeki oklar uyluk desteklerinin ayar imkanlarını göstermektedir. Bunlar genişlik, derinlik ve açı olarak ayarlanabilir.



Resimdeki oklar, sol tarafta kafalık pedlerinin ayar imkanlarını (düşük versiyon) ve sağ tarafta kafalık pedlerinin ayar imkanlarını (yüksek versiyon) göstermektedir. Bunlar genişlik ve açı olarak ayarlanabilir.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.




5.4 Aksesuarlar için tutucular.

Tutma rayını döşemeyle sabitlemek veya terapi tepsisini sabitlemek için.

Aksesuarlar için tutucular, çocuk ve tutma rayı arasındaki mesafeyi ve terapi tepsisi değişkenini düzenlemek için farklı derinliklerde monte edilebilir.

Krupiye'nin BINGO Evolution'ı farklı derinlik pozisyonlarında değiştirmesi mümkündür.

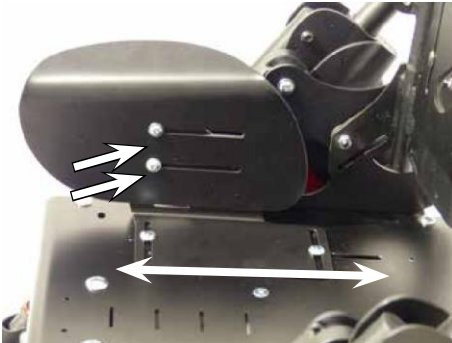

5.5 Kalça destekleri

Koltuğun altındaki kelebek somunlarını gevşettikten sonra kalça destekleri sürekli değişken derinliğe göre ayarlanabilir. İşaretili vidaları gevşettikten sonra, braket üzerinde de ayarlamak mümkündür.




Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.



5.6 Yan destek

- Yan destekler taşıyıcı için ayrılabilir.
- BINGO evolution Mini'nin yan desteklerinin çıkarılması mümkün değildir

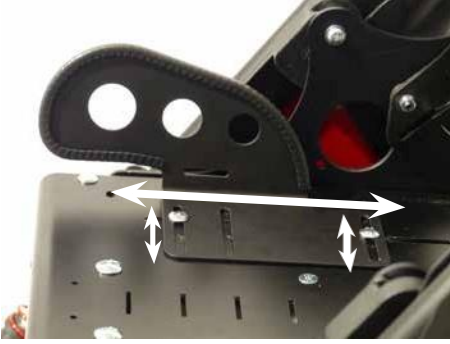

5.7 Uyluk destekleri

Koltuğun altındaki kelebek somunları gevşettikten sonra, derinlik, genişlik ve sürekli değişken açı ile ilgili uyluk desteklerini ayarlamak mümkündür.

Bkz. „5.3 Koltuk derinliği ve koltuk genişliği“



5.8 Arka yüksekliği

- Koltuk arkalığındaki kelebek somunları ve üstteki kapak somunlarını gevşetin ve istediğiniz arka yüksekliği ayarlayın.
- Çözülmüş vidaları iyice sıkın.




- Koltuk boyutu 1 için yaklaşık 55 cm ve koltuk boyutu 2 için 66 cm'lik bir arka yükseklikten, arka şasi, sırtlık plakasına üstten alta doğru yerleştirilmelidir.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun..



- BINGO Evolution Mini'nin arka kayışını ayarlamak için, önce arkadaki fermuarı açın.

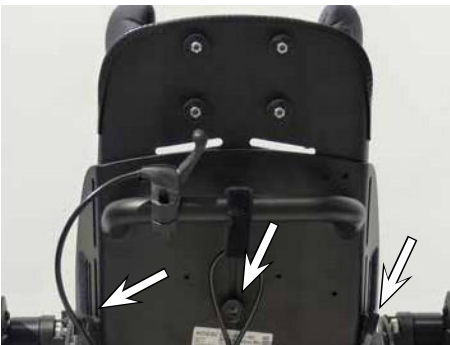

BINGO Evolution Mini:

- Arkadaki üç vida bağlantısını gevşetin ve ardından arka ek parçanın yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayın.
- Daha sonra fermuarı tekrar kapatın



5.9 Yaslanmak

- Önce koltuğun arkasında durun ve BINGO Evolution'ın tekerlek kilidini etkinleştirin. Mafsallı kolu diğer elinizle çalıştırmadan önce koltuk arkalığını bir elinizle sabitleyin.
- Koltuk arkalığını istenilen pozisyona ayarlayınız.



- Önce koltuğun arkasında durun ve tekerleği etkinleştirin, BINGO Evolution Mini'nin kilidini açın. Kolu bir elinizle sarın ve serbest bırakma kayışını aynı elinizle dikkatlice yukarı doğru çekin.
- Koltuk arkalığını istenilen pozisyona ayarlayınız.



5.10 Ayaklık askısı, açı ayarlı

- BINGO Evolution'ın tekerlek kilidini ve koltuğun önündeki konumu etkinleştirin. Mafsal kolunu diğer elinizle gevşetmeden önce ayak dayaması ve diz açısı tertibatını bir elinizle sabitleyin. Ayak desteğini istediğiniz konuma çevirin ve mafsal kolunu tekrar sıkıca sıkın.




- BINGO Evolution Mini'nin tekerlek kilidini etkinleştirin ve koltuğun önüne yerleştirin. Mafsal kolunu diğer elinizle gevşetmeden önce ayak dayaması ve diz açısı tertibatını bir elinizle sabitleyin. Ayak desteğini istediğiniz konuma çevirin ve mafsal kolunu tekrar sıkıca sıkın.



5.11 Ayak dayama askısı, 90 °

BINGO Evolution ürününüze ayak desteği askısı verilmişse, 90 ° BINGO Evolution ürününü yukarı katlamak gerekir (en kompakt katlama boyutunu elde etmek için).

- Pimi gösterildiği gibi çekin, ayak dayamasını kaldırın ve ayak dayaması askısını yukarı kaydırın.

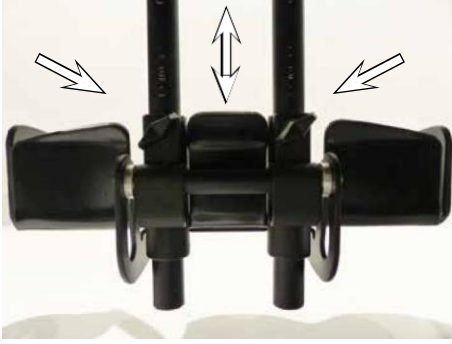

5.12 Alt bacak uzunluğu

- tekerlek kilidini açınız ve koltuğun önünde durunuz. Diğer elinizle kelebek somunları gevşetmeden önce ayak dayanağını bir elinizle sabitleyin. Ayak desteğini istediğiniz konuma kaydırın ve kelebek somunları tekrar iyice sıkın.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.



5.13 Ayak dayama açısı

Ayak dayama yeri kolayca nakliye için içeri ve dışarı çıkmak üzere kaldırılabilir.

- Ayak dayamasının altındaki 4 civatayı gevşettikten sonra ayak dayaması askıya geçirilebilir.



- Bu, ayak dayamasının konumunu ve dolayısıyla ayak dayaması açısını değiştirir.
- Ayak dayamasının açısı yaklaşık 80 ° ila 100 ° arasında ayarlanabilir.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.



5.14 Ayak dayanağı kilidi (isteğe bağlı)

Serbest bırakma halkasını çekerek, ayak desteği yukarı doğru katlanabilir. Ayak dayanağı aşağı katlandığında, otomatik olarak yerine kilitlenir.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.



5.15 Koltuk ünitesinin sökülmesi ve takılması

BINGO Evolution'ı bir arabada taşımak veya ağırlığı iki olaya paylaşmak için koltuk ünitesini sokak çerçevesinden ayırmak kolaydır. BINGO koltuk ünitesini (iç mekan) mobilite tabanında kullanmak istiyorsanız, bu da değerlidir.

- Koltuk ünitesini sökmeden veya takmadan önce, her zaman freni takarak puseti sabitleyin.
- Koltuk arkalığının 90 ° konumunda olduğundan emin olun.



Ayırma

- Rehabilitasyon pusetinin yanında durun.
- Koltuk ünitesini sonuna kadar eğin.



- Kırmızı kilitleme düğmesinin serbest bırakma düğmesinin yuvasında (yan panelde) açıkça görünüp görünmediğini kontrol edin.
- Serbest bırakma düğmesini basılı tutun.




- Uzayda yatırma fonksiyonunun aktif kolunu çekin ve kilitleme düğmesi koltuk braketinin plakasına bitişik olana kadar koltuk ünitesini döndürün.
- Koltuk ünitesini ek olarak ayak dayama askısına yerleştirin ve koltuğu kaldırınbirimi.



Bağlama

- Koltuk arkalığını ve ayaklık askısını oturtun.
- Koltuk ünitesini, koltuğun zemine dik duracak şekilde yerleştirin.

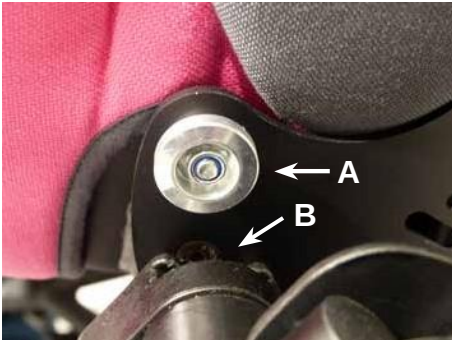

- Koltuk ünitesini sokak çerçevesine takın ve kılavuz milinin (A) her iki taraftaki (eğim) braketine (B) kaydığından emin olun.



- Kilitleme pimleri (eğim) tabanına (45 ° konumunda) ısıtılabilene kadar koltuk ünitesini döndürün.
- Koltuk ünitesini ve yaslanmayı istenen konuma ayarlayın.



Dikkat! Aksesuarlardaki aşırı kayış uçları eğim mekanizmasına sıkışmış olabilir ve kilitleme pimlerinin takılmasını önleyebilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir. Aksesuarlar üzerindeki fazla kayış uçlarını sıkışmayacak şekilde kısaltın. Koltuğu, koltuk ünitesinin düzgün şekilde yerine oturduğunu keskin bir şekilde öne doğru çekerek kontrol edin. Kilitleme pimlerinin tamamen yerine oturduğunu kontrol edin. Gerekirse tamamen içeri itin.

5.16 Koltuk ünitesinin ters sürüş yönünde kullanılması

Koltuk ünitesi ters sürüş yönünde de kullanılabilir.

Ancak, bu 2XL boyutunda mümkün değildir.

5.17 Uzayda eğim

BINGO Evolution koltuk ünitesi 45 ° 'ye kadar yatırılabilir.

- Tekerlek kilidini takın ve rehabilitasyon pusetinin yanında durun.
- Koltuk ünitesini bir elinizle arkalık üzerine sabitleyin ve serbest bırakma kolunun sertliğini önlemek için yatırma kilidini açın.



- Bu şekilde BINGO Evolution Mini'nin uzayda eğimi gösterilmektedir.



- Kilitleme cıvataları uzayda eğme fonksiyonunu etkinleştirene kadar aktif kolu çekin ve koltuk ünitesini istenen konuma getirin.
- Aktif tutamağı serbest bırakın ve kilitleme cıvataları ısıtılabilene ve uzayda eğme işlevi güvenli bir şekilde kilitlenene kadar koltuk ünitesini hareket ettirin.



Dikkat! Kilitleme pimlerinin sağlam bir şekilde yerleşip yerleşmediğini koltuk biriminde keskin bir itme ile kontrol edin.



5.18 Hızlı serbest bırakma ile tekerleklerin sökülmesi

Tüm çerçeve tiplerinin arka tekerlekleri ve sert çerçeve tipinin ön tekerlekleri hızlı bağlantı elemanları ile sökülebilir. Böylece daha küçük bir katlama boyutu elde edilebilir.



- Sökmek için hızlı bırakma yayını tekerleğin ortasına doğru bastırın ve tekerleği akstan çekin.



5.19 ASS Adaptif süspansiyon sistemi

BINGO Evolution ayarlanabilir (4 kademeli), uyarlanabilir çerçeve süspansiyon sistemi (ASS) ile tedarik edilebilir.

Farklı yay setleri mevcuttur:

- yay seti, BINGO Mini için, 15 kg'a kadar
- yay seti ,yük kapasitesi için 25 kg'a kadar
- yay seti, yük kapasitesi için, 25 kg'dan fazla

Süspansiyon muhafazasındaki ölçeklendirme bir kılavuz görevi görür. Dışarıdan görünen sayı ayarlanan seviyeyi temsil eder.



5.20 Pnömatik lastikler

Rehabilitasyon pusetiniz pnömatik lastiklerle donatılabilir. Araba valfleri, her benzin istasyonundaki hava basıncının kontrol edilmesine ve ayarlanmasına izin verir. Lastikte belirtilen hava basıncına dikkat edin.

6 Aksesuarlar

Üretici tarafından takılmayan tüm aksesuarlar eğitimli teknisyenler tarafından takılmalıdır.

Kurulumla ilgili aşağıdaki notlar bilginiz içindir, ancak eğitimli teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir



Aksesuarlardaki kayışlar genellikle her seçeneği karşılamak için ekstra uzundur. Aksesuarlardaki aşırı kayış uçları, koltuk montaj arayüzünün iki parçası arasında sıkışmış olabilir ve kilit piminin tam olarak yerine oturmasını önleyebilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir. Aksesuarlar üzerindeki fazla kayış uçlarını sıkışmayacak şekilde kısaltın. Kayış uçlarının yıpranmasını önlemek için kesilen uçlar bir alevle birlikte eritilebilir. (örn. çakmak)



6.1 Döner kilit

Döner kilit üretici veya yetkili satıcı tarafından monte edilir.

- Döner kilidi kilitlemek için kilit pimini 90 ° döndürün ve tekerlek çatalındaki belirtilen deliğe oturmasını sağlayın.
- Döner kilidi açmak için kilit pimini çekin, açık konumda kalacak şekilde 90 ° çevirin.



- Sıkıştırma vidasını gevşettikten sonra, kanal kilitli döner kilit ile ayarlanabilir.



6.2 Yumuşak aksesuar çantası

BINGO Evolution, taşıma kapasitesinin maksimum 3 kg'a ayarlandığı puset ile tamamen katlanan yumuşak bir aksesuar çantası ile birlikte tedarik edilebilir.



Saklama çantasında taşınabilecek maksimum ağırlık "model yumuşak" 3 kg'dır.



- Çanta, çerçeveye sabitlemek için Velcro tutturucularla tutturulmuştur.



- Velcro bağlantı elemanlarını gösterildiği gibi ön çerçeveye sabitleyin.
- Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.



- gösterildiği gibi arka şasideki Velcro tutturucular.
- Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.



- Yumuşak aksesuar çantası, koltuk ünitesi sürüş yönüne de monte edilmişse, koltuk ünitesi sürüş yönüne de monte edilmişse kullanılabilir.



- Şekilde katlanabilir yumuşak aksesuar çantası dahil katlanmış BINGO Evolutio (burada koltuk ünitesi olmadan) gösterilmektedir.



6.3 Katlanır aksesuar çantası

BINGO Evolution, taşıma kapasitesinin maksimum 8 kg'a ayarlandığı puset ile tamamen katlanan bir aksesuar çantası ile birlikte tedarik edilebilir.



Aksesuar çantasında taşınabilecek maksimum ağırlık 8 kg'dır.



- Katlanır, geniş aksesuar çantası" bol miktarda saklama alanı sunar.



- Torba, her çerçeve tarafına, torba kayışı için bir tespit kayışı ve perçin ve anahtar halkalı iki kayış ile tutturulmuştur.
-



- Bayi tarafından „yumuşak“ aksesuar çantasından “büyük katlanır aksesuar çantasına” değişiklik yapmak mümkündür.



6.4 Koltuk başlıkları

Koltuk başlıkları, arka ek üzerine taşıma civataları ve tırtıllı somunlarla monte edilmiştir.

- Kolay montaj ve ayarlamalar için sırtın arkasındaki döşeme kapağının fermuarı açın ve arka baş döşemesini geri çevirin.



- Koltuk başlığı genişliğinin kaba bir şekilde ayarlanması için kendinden yapışkanlı köpük pedler koltuk başlığı braketlerinin soluna ve / veya sağına yapıştırılır.



- Kapağı takın.
- Tırtıllı somunları gevşettikten sonra, baş desteği yastıkları ince bir genişlik ayarı için içeri veya dışarı hareket ettirilebilir.



- Yükseklik ayarı, arka ekin ayarlanmasıyla gerçekleştirilir.



6.5 Koltuk başlıkları (düşük versiyon)

Koltuk başlıkları (düşük versiyon) koltuk başlıkları ile aynı şekilde monte edilir. Bkz. 6.4. koltuk başlığı yastıkları.

- Kolay montaj ve ayarlama için fermuarı açın ve koltuk arkalığı minderini gösterildiği gibi geri alın.



- Kapağı takın.
- Fermuarı gösterildiği gibi kapatın



- Resimde döşemelik dahil olmak üzere monte edilmiş kafalık yastıkları (düşük versiyon) gösterilmektedir.

6.6 Üniversal koltuk başlığı braketi (sadece omuz yüksekliğine kadar sırtlık ile bağlantılı olarak)

Evrensel koltuk başlığı braketi, koltuk arkalığı plakasına monte edilir. Ayar kolunu gevşettikten sonra, takılı bir koltuk başlığını yüksekliğe ayarlamak mümkündür



6.7 Oksiput döşemeli koltuk başlığı (üniversal mafsalsal ile bağlantılı olarak)

Üniversal mafsalsal üzerindeki kontra somunu gevşettikten sonra, baş dayanağını üç boyutlu olarak ayarlamak mümkündür. Üst kanat somununu gevşettikten sonra, baş dayanağını derinlikteki uzun delikle ayarlamak mümkündür. Her iki kanat somununu gevşettikten sonra, kilit pulunu kullanarak koltuk başlığını ayarlamak mümkündür. Döşemenin içindeki boş sayfa kafa şekline ayarlanabilir. Temizlik için kapak çıkarılabilir.



Resimde koltuk başlığı oksiput döşemeli olarak gösterilmektedir.



6.8 Bagaj destekleri

Bagaj pedleri, arka döşemeler çıkarılmış olarak arkaya monte edilir. Bagaj yastığı şekilde gösterildiği gibi konumlandırılır ve vida, sırtlık plakasındaki uzun delikten geçirilir. Üçgen ped kılavuzu arka taraftan takılır. Ped kılavuzundaki damgalama uzun deliğe yerleştirilmelidir. En az bir rondela tıkanır ve kelebek somun iyice sıkılır. Kanatlı somunu gevşettikten sonra, gövde pedini yüksekliğe göre kademesiz olarak ayarlamak mümkündür. Yataydan bükümlü pozisyon pedlerin genişliğini birbirine ayarlamak mümkündür.

- Vidaları sıktıktan sonra, arka döşeme bagaj pedlerinin altına itilir.



- Bagaj yastığının açısı, bagaj yastığı kapağının altındaki sıkıştırma vidasını sıkarak sabitlenir.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıktığınızdan emin olun.





6.9 Kucak kemeri

Koltuk ve arkalık döşemelerini çıkarın. Tur kemerlerini serbest bırakın ve kayışı gösterildiği gibi yönlendirin

Serbest kayış uçlarının uzunluğu, tüm votka kayışının uzunluğunu belirler.



- Daha sonra kayış uçlarını şekilde gösterildiği gibi tokadan geçirin.



- Şekil sabit kayışı göstermektedir.



- Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.
- Ardından her iki kayış ucunu birbirine bağlayın ve kayışı kapatın.



- Toka üzerindeki kırmızı tuşa basarak kucak kemerini açın.

Kucak kemeri, kayışın ucunu tokenın yanına çekerek ayarlanabilir (Hassas ayar).



6.10 4-nokta kucak kemeri

Montaj eğitimli teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Fiş uçlarına basarak kucak kemeri açılır. Kemer tokasında vatka kemeri vatka uçları ekleyerek yeniden ayarlanabilir (ince ayar).




- Önce koltuk döşemeleri çıkarılmalıdır. Ardından, gergi kayışları için üç kaymayı, uyluk desteklerinin uzun deliklerinden gösterildiği gibi yönlendirin.



- Daha sonra kayış uçlarını gösterildiği gibi triglidlerden geçirin.

Tur biter ve gerginlik kayışları 4 noktalı kucak kemeri monte edilir ve önceden ayarlanır (uzunluk) 6.9 bindirme kemeri altında açıklandığı gibi.

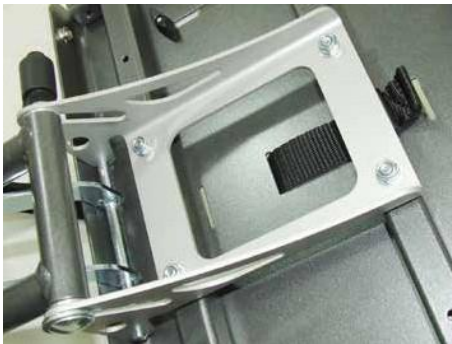

6.11 Beş noktalı emniyet kemeri

Beş noktalı emniyet kemeri yetkili satıcılar veya eğitimli teknisyenler tarafından takılmalıdır. Önce koltuk döşemesini çıkarın ve koltuk ünitesini çevirin. Koltuk plakasında uzun delikler vardır. Kemerı yönlendirmek için koltuk derinliğini bir uzun delik ayarladıktan sonra seçin. Pozisyon vücuda yakın olmalı, ancak tabanın altında olmamalıdır.



- Önce kayış mahfazasını ve triglide'ı çıkarın.
- Kemer ucunu tutucuya kadar koltuk plakası ve koltuk çerçevesi borusundan geçirin ve seçilen uzun delikten yüzeye doğru yönlendirin.
- Koltuk minderini sabitleyin ve kemeri yastıktaki yuvadan yukarıya doğru yönlendirin.
- Kayışı tokaya takmak için 6.9 kucak kemeri açıklandığı gibi devam edin.



- Tokaları kayışlardan çıkarın.
- Omuz kayışlarını ped kayışlarıyla birlikte arka ekte belirtilen uzun deliklerden geçirin



Omuz askıları arka tabandaki uzun deliklere tutturulmuştur.

Tokaları, bölüm 6.9'da gösterildiği gibi kayışlara sabitleyin.

- Ped kayışlarını birbirine bağlayın.



- Omuz askıları, uzunluk ayarlayıcılarının mahfazası omuz yastığına dayanacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Beş noktalı kablo demetinin bindirme kayışı uçlarını 6,9 bindirme kemerinde açıklandığı gibi monte edin ve kabaca önceden ayarlayın.



Beş noktalı kablo demetini çıkarmak için aşağıdakileri yapın:

- Toka üzerindeki kırmızı düğmeye basın.
- Uzunluk ayarlayıcıların tuşlarına basın ve kayışın ucunun yaklaşık 5 cm (2 inç) kalması için kayışı dışarı çekin.
- Çocuğunuzun kollarının emniyet kemerinden kolayca çıkmasına izin veren geniş halkalar oluşturun.
- Çocuğunuzu koltuktan kaldırın.



Göğüs omuz kemerini takmak için:

- Çocuğunuzu koltuğa yerleştirin.
- Çocuğunuzun dirseğini önce omuz askısı halkalarından birine, ardından önkol ve ele geçirin.
- Diğer kolla aynı şekilde ilerleyin.
- Toka elemanlarını birbiri ardına tokaya yerleştirin.
- Uzunluk ayarlayıcısından çıkan kayış uçlarını çekerek omuz ve kucak kayışlarını sıkın.



6.12 Ayak kayışları

Ayak kayışlarını D-halkalarından çocuğunuzun ayakkabısı / ayağı üzerine çapraz olarak geçirin Topuk, ayak dayamasının topuk plakasına karşı yerleştirilmelidir. Tokayı daima dışa doğru yerleştirin. Ayak kayışlarını sıkmak için serbest kayış ucunu çekin. Tokayı açmak için tokadaki tuşa basın.



6.13 Ayak bileği sarıcı

Ayak bileği sarıcıları, ayak eklemlerinin rahat bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Ayak plakası üzerindeki ankrajlara sabitlenirler. Topuk, ayak dayamasının topuk plakasına karşı yerleştirilmelidir. Velcro kayışlar, ayak bileği kayışlarını kapatmak ve uzunluklarını ayarlamak için kullanılır. Tokayı daima dışa doğru yerleştirin.



6.14 Kasık kayışı

Kasık kayışını monte etmek için koltuğu hareketlilik tabanından çıkarmanızı öneririz. Ve koltuk döşemesini çıkarın

Tokayı koltuk panelinin alt tarafına yerleştirin ve koltuk panelinin üst tarafından gelen vidayı arka delik deliğine yerleştirin. Rondela ve biloc somununu takın. Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.



- Koltuk döşemesini sabitleyin.



- Kayışları gösterildiği gibi yönlendirin.



- Tokayı yerleştirin ve sıkın. Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.



- Resimde kasık kayışının takılı sabitleme kelepçeleri gösterilmektedir.



- Kayışı dışarıdan yan plakanın uzun deliklerinden geçirin.



- Kayışın ucunu halka boyunca yönlendirin ve sıkın.



- Fişleri şekilde gösterildiği gibi kayışlara geçirin ve çaprazlayın.



Dikkat!

Aksesuarlardaki aşırı kayış uçları eğim mekanizmasına sıkışmış olabilir ve kilitleme pimlerinin takılmasını önleyebilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir. Aksesuarlar üzerindeki fazla kayış uçlarını sıkışmayacak şekilde kısaltın.

Kasık kayışını takmak için aşağıdakileri uygulayın:



- Çocuğunuzu kasık kayışındaki bebek arabasına yerleştirin.
- Uyluk kayışları bacakların arasından uylukların içinden ve üstünden geçirilir, bu nedenle uyluk kemerinin toka takılı olduğu kısmı pelvik kemik üzerinde olmalıdır.
- Gerdirmeye kayışlarında bulunan hızlı serbest bırakma tokalarının erkek kısmını uyluk kayışlarındaki tokalara yerleştirin.
- Tokadan çıkan kayışın serbest ucunu çekerek uyluk kemerini sıkın.
- Hızlı serbest bırakma tokasını devreden çıkarmak için tokadaki tuşa basın.



6.15 Sabitleme ceketini

Sabitleme ceketini kayışlarını takmak için altı kam kilitli tokayı arka plakanın dışına perçinleyin (içeriden dışarıya). Sabitleme ceketinin omuz kayışlarını omuz yuvalarından arkaya geçirin. Orta "aksiller kayışlar", arka çerçeve borusu ile arka plaka arasında uygun yükseklikte geçirilmelidir. Alt kayışları arka tabanın alt kısmındaki yuvalardan geçirin (ayrıca bkz. 6.9 Tur kemeri) arkaya.



Tüm kayışları açık kam kilit tokalarından geçirin ve menteşeli kamı kapatarak yerine kelepçeleysin



Dikkat!

Aksesuarlardaki aşırı kayış uçları eğim mekanizmasına sıkışmış olabilir ve kilitleme pimlerinin takılmasını önleyebilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir. Aksesuarlar üzerindeki fazla kayış uçlarını sıkışmayacak şekilde kısaltın.



Sabitleme ceketinin açılması:

- Sabitleme ceketinin omuz kısmındaki hızlı açılan tokaları açın.
- Fermuarı aşağı çekin ve sabitleme ceketini açın.
- Çocuğunuzu koltuktan kaldırın.



Closing the fixation jacket:

- Çocuğunuzu koltuğa yerleştirin.
- Fermuarı kapatın.
- Omuzlardaki bağlantı elemanlarını bir araya getirin.

- Gerekirse tokaları yeniden ayarlayın.



6.16 Göğüs-omuz kemeri

Göğüs omuz kemeri takmak için, dört kam kilitli tokayı arka plakanın dışına perçinleyin (içeriden dışarıya). Göğüs omuz kemeri omuz kayışlarını belirtilen yuvalardan geriye doğru yönlendirin. Alt kayışları arka tabanın alt kısmındaki yuvalardan geçirin (ayrıca bkz. 6.9 Tur kemeri) arkaya. Tüm kayışları açık kam kilit tokalarından geçirin ve menteşeli kamı kapatarak yerine kelepçeleysin.



Dikkat!
Aksesuarlardaki aşırı kayış uçları eğim mekanizmasına sıkışmış olabilir ve kilitleme pimlerinin takılmasını önleyebilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir. Aksesuarlar üzerindeki fazla kayış uçlarını sıkışmayacak şekilde kısaltın.



Göğüs omuz kemeri takmak için:

- Çocuğu bebek arabasına oturtmadan önce, arka plakadaki dört kam kilitli tokaları serbest bırakın.
- Göğüs ve omuz pedini hafifçe öne doğru çekin, pedin alt ucundaki menteşeli kamları açın ve kayışları dışarı çekin.
- Kayışları koltuğun yan taraflarına yerleştirin
- Çocuğunuzu koltuğa yerleştirin.
- Göğüs ve omuz pedini başın üzerinden göğse doğru çekin.
- Ardından, kayışları durdurma perçinlerine kadar pabucun alt kam kilit tokalarına geçirin ve tokaları kapatın.
- Ardından alt kayışları arkadan sıkın.



- Göğüs ve omuz pedinin pelvis üzerine simetrik olarak yerleştirildiğinden emin olun ve alt kayışlardaki tokaları kapatın.
- Çocuğunuzun üst gövdesini arkaya dik olarak yerleştirin.
- Son olarak, koltuğun arkasındaki üst kayışları sıkın ve üst kayışlardaki tokaları kapatın

Bantlar çocuğa değmediğinde ve kablo demetinin boncuklu kenarı kayış kılavuz yuvasına temas etmediğinde kablo demetinin oturması ve konumu doğrudur. Kayış kılavuz yuvası yakl. Çocuğun omzunun 2-3 cm üzerinde



6.17 Kaçırma bloğu sabit / salınabiliyor

BINGO Evolution sabit veya döner bir abdüksiyon bloğu ile tedarik edilebilir. Kolayca girebilmek için salıncaktan kaçırma bloğunu uzaklaştırabilirsiniz.



Uzaklaşmak için:

- BINGO Evolution'ın önüne yerleştirin ve bir elinizle engelleme kelepçesini gösterildiği gibi bastırın ve kaçırma bloğunu diğer elinizle aşağıya doğru sallayın.



Şekil, salınan abdüksiyon bloğunu göstermektedir.



Ayırmak:

- Düğmeye basın ve kaçırma bloğunu öne doğru hareket ettirin.



Koymak için:

- Kaçırma bloğunu yerleştirin ve düzeltmek için yukarı hareket ettirin.



6.18 Döşemeli tutma rayı

Tutunma rayının uzun kısmını aksesuarlar için tutucunun bir tarafına yönlendirin.

Bu kılavuzdan sonra, aksesuarlar için diğer tutucuya geçme düğmesine basarak tutma rayının daha kısa ucu



Tutma rayını çıkarmak için, koltuk ünitesinin yönüne bakacak şekilde yan yana durun. Tespit braketinin üstünü soldan sağa ve sağdan tutun. Çıtçıtt düğmelerine basarak tutma rayını çıkarın ve rayı yukarı çekin.

Fermuar açılarak kapağın çıkarılması kolaydır.



6.19 Terapi tepsisi

Koltuk ünitesindeki aksesuarlar için tepsiyi dikey yuvarlak tüplerle birlikte tutucuya yerleştirin.

P Çıtçıtt düğmelerine basın ve yana baktıklarından emin olun.

Terapi tepsisini çıkarmak için bkz. 6.18



Tepsi üstü, sıkıştırma kolunu (A) kullanarak derinlik ve açıyla ayarlanabilir. Vida bağlantılarını (B) gevşettikten sonra yüksekliği ayarlanabilir modeller yükseklik olarak ayarlanabilir.

Tepsi sadece koltuk ileriye doğru sürüş yönüne monte edilmişse kullanılabilir.



Tepsilere 5 kg'dan (11 lb) daha ağır nesneler yüklenmemelidir.



6.20 Aksesuarlar için tutucular

Aksesuar tutucuları tutma rayını ve terapi tepsisini takmak için kullanılır.

Aksesuarlar için tutucular, çocuk ve tutma rayı veya terapi tepsi arasındaki mesafeyi değiştirmek için farklı derinlik konumlarına monte edilebilir.

Bayi tarafından başka bir derinlik pozisyonunda değişiklik yapmak mümkündür.



- Bu çizimde, BINGO Evolution Mini aksesuarlarının tutucuları gösterilmektedir.



6.21 Kış ısıtıcısı

Fermuarlar, kış ısıtıcısının üst kısmının açılmasına veya çıkarılmasına izin verir.

Kış ısıtıcıyı bebek arabasına yerleştirin ve kayışlarla bağlayın.



Arka ekin çerçevesine üst kayışlar.



Kayışları arka tabanın alt alanına indirin.



6.22 Koyun derisi eki

Kış ısıtıcısının üst tarafını çıkardıktan sonra, koyun derisi eki kış ısıtıcısına yerleştirilir.



6.23 Yağmur pelerini

Fermuar kapalıyken, yağmur pelerini çocuğun başının üzerine çekin, sonra üst ucunu koltuk arkalığının üzerine ve alt ucunu da ayaklığın etrafında açın.



6.24 Gölgelek dahil. adaptör ve yağmurluk

Önce kanopi adaptörlerini arka yuvaya monte edin. Arka paneldeki vidaları gevşetin ve arka ek parçayı arka tabandan dışarı çıkarın.



- Adaptörleri gösterildiği gibi takın.



- Adaptörleri gösterilen yüksekliğe yerleştirin.



- Kanopi adaptörlerini iyice sıkın. Diğer tarafta da aynı şekilde devam edin.



- Kanopinin erkek pimlerini her iki taraftaki kanopi adaptörlerine takın.



Kanopinin açısını ayarlamak için ayarlanabilir mandal bağlantıları kullanılır.

- Kanopiyi açın ve koltuğun arkasına sarın



Yağmurluklu gölgelik:

Yağmur kapağını sargıya takılı torbadan çıkarın, yağmur kapağını açın, katlanmamış kanopinin üzerine çekin ve ayaklık düzeneğinin üzerine yerleştirin.



Şeffaf yağmurluk nedeniyle sırtlığın açısı sınırlıdır. Açı ayarı, 90 ° koltuk ve diz açısına uyarlanır. Hareketsiz bir konum ayarlamak için eğim fonksiyonundaki boşluğu kullanın. (bakınız 5.17).

6.25 Görevli freni

BINGO Evolution mobilite tabanına bir refakatçi freni takılabilir. Fren mekanizması tek bir kol ve bir kablo anahtarı veya iki bağımsız fren kolu ile çalıştırılabilir.





Düzeltilmeler:

Görevli fren seti önceden ayarlanmıştır.

Bununla birlikte, kurulumdan hemen sonra veya bir süre kullanıldıktan sonra ayarlamalar gerekli hale gelirse, aşağıdaki seçenekler vardır:



AHer bir fren muhafazasının çıkışında, krank ayar vidası fren kablosunu arka tekerleğin lastiğinden uzaklaştırır.

Kontra somunu gevşettikten sonra bireysel (sol veya sağ) frenin ön gerilimi ayarlanabilir.

Kontra somunu tekrar iyice sıkın ve ayar vidasının krankının arka şasiye doğru lastikten uzağa baktığından emin olun.



6.26 Kampanalı frenler

BINGO Evolution, kampanalı frenlerle de donatılabilir.

Kampanalı frenler basma çubuğundan etkinleştirilir.



Her kampanalı fren bir fren kolu ile çalıştırılır. Kampanalı freni uygulamak için fren kolunu sıkın.

Parmak uçları ile bir tıklama ile kilitlenene kadar fren mandalına bastırın ve fren kolunu serbest bırakın. Fren kolu tekrar sıkıldığında, sallanan mandal kilidi açılır ve kampanalı fren serbest bırakılabilir.



Kontra somunu gevşettikten sonra başlangıç gerilimi, bowden kablunun kılavuzunun vidalanmasıyla ayarlanabilir.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşemiş olan vidaları iyice sıkıttığınızdan emin olun.



6.27 Buggy-Board / Kiddy-board

İkinci bir çocuğu taşımak için BINGO Evolution çıkarılabilir bir buggy veya kiddy kartıyla birlikte tedarik edilebilir.



Buggy ve çocuk kurulu 2 yaş ve 20 kg'a kadar dayanıklı çocuklar için geçerlidir.



6.28 Güneşlik

BINGO Evolution güneşlikle temin edilebilir.

Bu amaçla, adaptör gösterildiği gibi gidona vidalanır. Güneşlik, bir geçmeli sistem üzerinden adaptörden çıkarılabilir. Rehab buggy katlanırken adaptör çerçeve üzerinde kalır..



6.29 Aksesuar ve bebek bezi çantası

- Dalgıçların iç ve dış ceplerine sahip geniş bir çanta.
- Mat, şişe termo çanta ve bebek bezi için küçük bir cep dahil.
- Daha iyi taşıma konforu için omuz yastığı.
- Tıklama sistemi ile bebek arabasına kolay erişim.



İtme koluna ağır çantalar veya benzeri bir şey takmak stabilite üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.



7 Ulaşım

7.1 Bir arabanın bagajında (bagaj boşluğu)

Temel olarak BINGO Evolution ürününüzü, koltuk ünitesi olsun olmasın, tekerlekli veya tekerlekli olmayan arabanızın bagajında saklayabilirsiniz.



En kompakt katlama paketini elde etmek için sırtlığı katlayın ve arka tekerlekleri çıkarın.

7.2 BINGO Evolution'ın kullanımı: aşağıdakilere göre otobüs taşımacılığı için: ISO 7176-19 ve ANSI / RESNA WC-4

7.2.1 Genel bilgiler

- Rehabilitasyon pusetinizin çarpışma testi için uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Aracın rehabilitasyon pusetinizi taşımak için donanımlı ve uyumlu olduğunu kontrol edin.
- Güvenli taşıma için de yeterli alan olmalıdır.
- Nakliye sırasında dik oturma pozisyonu sağlayın.



Tekerlekli bir ambulansla rehabilitasyon pusetinin yanlış kullanılmasının tipik kullanımın ötesinde tehlikeli olabileceğini lütfen unutmayın. Bu tavsiyeye uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olacaktır.

7.2.2 Otobüs taşımacılığı sırasında rehabilitasyon pusetinin sabitlenmesi



Kaza durumunda yolcuların mümkün olan en iyi şekilde korunmasını sağlamanın tek yolu budur, mümkün olan her yerde ve her ne zaman kullanıcıların motorlu taşıtta bulunan koltuklara aktarmalarını ve ilgili araç emniyet sistemlerini kullanmalarını öneriyoruz. BINGO Evolution rehabilitasyon pusetiniz ANSI / RESNA WC / 19 ve ISO 7176/19 (Çarpışma Testi) uyarınca başarıyla test edildi. Ancak, BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinizi şu şekilde kullanmak mümkündür: "Bağlama Kitimiz" (madde 3231-7300) ve uygun emniyet sistemleri kullanılıyorsa motorlu taşıttaki bir koltuk. BINGO Evolution ürününüz henüz bir motorlu taşıtta koltuk olarak kullanılmak üzere kabul edilmiştir. DİKKAT! BINGO Evolution Mini için önemli not: BINGO Evolution Mini henüz bir motorlu araçta koltuk olarak kullanılmamaktadır. Uluslararası ISO 7176/19 standardına göre çarpışma testi, BINGO Evolution Mini için geçerli değildir.



Rehabilitasyon puseti sadece ileri yönde kullanılabilir.



Rehabilitasyon puseti, kukla kucak kemeri ve omuz askısı ile bağlanırken dinamik olarak seyahat yönünde test edildi.

- 1) Kullanıcı kendini rehabilitasyon pusetinde bulursa, rehabilitasyon puseti ileri konumlandırılmalı ve emniyet sistemi üreticisinin kullanım talimatlarına göre sabitleme ve emniyet kemeri ile sabitlenmelidir (WTORS'a atıfta bulunan tespit kemeri ISO 10542 veya SAE J2249 gerekliliklerini yerine getirir).
- 2) Tekerlekli sandalye başka bir konumda taşınması için test edilmemiştir. Örneğin yanal yönlendirilmiş bir konumda nakliye için izin verilmez.
- 3) Bebek arabasının büyüklüğüne bağlı olarak manevra kabiliyeti bozulabilir, böylece bebek arabasını dönüş yönünde ileriye doğru hareket ettirmek için bebek arabasının döndürülmesi mümkün değildir veya sadece kısmen mümkündür.
- 4) Puset, ön tarafında sabit kayışlar ve arkada ayarlanabilir kayışlar ile ISO 10542 veya SAE J2249 olarak belirtilen bir emniyet sistemi ile sabitlenmelidir. Genellikle bu, geçmeli kancalar / s şeklindeki kancalar ve fişli kapaklarla ilgilidir. Emniyet sistemleri genellikle, pusetin 4 kenarına tutturulması gereken 4 adet tek kayıştan oluşur. Bebek arabası emniyet sistemlerinin bağlantı noktaları uluslararası kanca simgesiyle işaretlenmiştir.
- 5) Rehabilitasyon puseti, diğer konumlandırma ve sabitleme sistemleriyle taşınması için de desteklenebilir. Ancak, bunlar yolcu ve rehabilitasyonlu bebek arabası emniyet sistemlerinin yerine geçmez ve kullanıcı konforunu sınırlayabilir. ISO 7176-19 Ek D test yöntemlerine göre araç bağlantılı kayışların rehabilitasyon arabası tarafından yerleştirilmesi "zayıf" olarak derecelendirildi.





Üreticiye danışmadan, pusetin bağlantı noktalarında veya şasi ve çerçevenin bileşenlerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz veya değiştirilemez. Bu gerekliliklere uyulmaması halinde, bebek arabası araçlarda taşınmamalıdır.



Araçta oturanların yaralanma riskini azaltmak için, çarpışma güvenliği için özel olarak tasarlanmamış aletler çıkarılmalı ve araçta güvenli bir şekilde ayrı olarak saklanmalıdır. Koltuk değnekleri, gevşek yastıklar, terapi masaları vb.

7.2.3 Rehabilitasyon puseti yolcunun burkulması




Kullanıcının omuz kemerinin yanı sıra kucak kemeriyle bağlanması gerekir.



Omuz ve votka kemerleri, araç bileşenleri üzerindeki olası yaralanmaları en aza indirmek ve / veya önlemek için kullanılmalıdır.

- 1) Eki yapan kişi, sistemin kullanımı konusunda eğitilmelidir.
- 2) Nakliye öncesinde, rehabilitasyon pusetinin aşağıdaki ayarlarının yapılması gerekir:
- 3) Koltuk: 0 ° - 5 °
- 4) Sırtlık: 90 ° - 100 °
- 5) Ayak: 90 °
- 6) Kucak kemeri ile yatay arasındaki açı 30 ° - 75 ° arasında olmalıdır. 75 ° 'ye yakın bir açı tercih edilir.

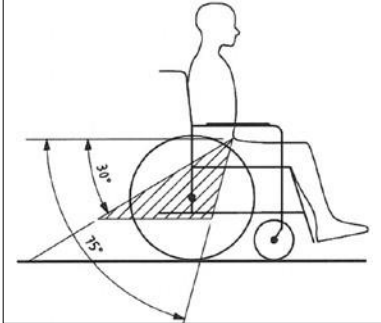

- 7) Omuz kemeri göğüs ve omuza doğru uzanmalıdır. Kemer boyuna takılmayabilir ve omuzdan gevşek olarak takılamaz.
- 8) Kemer kayışı kıvrılmamış olabilir.
- 9) Kullanıcının kafası ayrıca veriyolundaki ayrı ve kalıcı olarak monte edilmiş bir koltuk başlığı ile emniyete alınmalıdır.
- 10) Lütfen kampanalı freni sıkıca kilitleyin
- 11) Lütfen manuel freni sıkıca kilitleyin
- 12) Bununla birlikte, bir trafik kazası durumunda, yolcu ve rehabilitasyonlu bebek arabası emniyet sistemleri doğru kullanılsa bile yaralanma riski en aza indirilebilir ve ortadan kaldırılamaz.



Belt restraints should make full contact with the shoulder, chest, and pelvis and pelvic belts should be positioned low on the pelvis near the thigh-abdominal junction.



Kucak kemeri ve omuz kemerinin vücuda düzlem atması gerekir.



Mümkün olduğunca tüm katkı maddeleri sökülmesi ve güvenli bir şekilde saklanmasıdır:
• koltuk değnekleri, gevşek yastıklar ve terapi tepsileri



Aşağıdaki şartlara uygun olarak işaretlenmedikçe yolcu güvenlik sistemlerine güvenmemelisiniz. ISO 7176-19: 2008.



Yolcu emniyetinin, bir kaza durumunda, serbest bırakma düğmesinin puset bileşenleri tarafından tetiklenmemesine ve emniyet kemerlerinin istem dışı açılmasına neden olacak şekilde konumlandırılmasına dikkat edilmelidir.




Bir çarpışmadan veya otobüslü bir kazadan sonra puseti tekrar kullanmadan önce, puset yetkili personel tarafından olası hasarlar için kontrol edilip tekrar serbest bırakılana kadar otobüste taşınmak için kullanılamaz.



Bağlantı noktaları, ön ISO 7176-19'a göre



Kucak kemeri için ISO 7176-19 uyarınca arka bağlantı noktaları

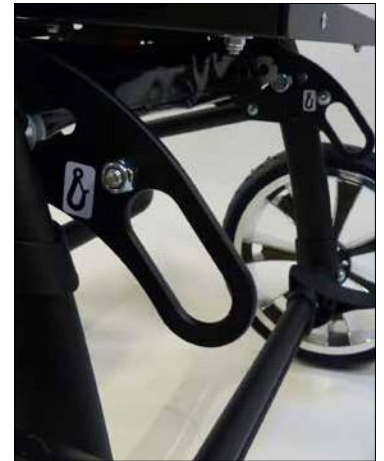

Bağlantı noktaları, arka ISO 7176-19 uyarınca

8 Bakım / Servis ve Onarım ve işletme ömrü

8.1 Bakım / Servis ve Onarımlar

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetiniz CE onaylıdır. Üretici bu vesileyle bu tıbbi ürünün bir bütün olarak 93/42 / EEC Kılavuzunun gerekliliklerine uygun olduğunu garanti eder. Rehab pusetinin her kullanımdan önce düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Aşağıdaki tabloda listelenen öğeler belirtilen aralıklarla kullanıcı tarafından işaretlenmelidir. Bu basit kontrollerin yapılmaması garantiyi geçersiz kılacak sorunlara yol açabilir.

Kontrol	Günlük	haftalık	aylık
Fren / tekerlek kilidinin fonksiyon testi	X		
Vida bağlantılarının kontrolü		X	
Hava basıncı (lastiğin yan duvarında gösterilir)		X	
Tekerlekler ve rulmanlar gibi aşınan parçaların görsel kontrolü			X
Rulmanlarda kirlenme			X
Çabuk bağlantı (arka tekerlek)	X		
Ayak dayamasının sağlamlığını kontrol edin		X	
Eğim mekanizmasının fonksiyon testi			X
Arka ayar açısının fonksiyon testi			X

Herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumunda, lütfen bunları gidermek için yetkili HOGGI satıcınıza başvurun. Ayrıca BINGO'nuza her on iki ayda bir yetkili satıcınız tarafından bakım yaptırmanızı öneririz.



Temizlik ve bakım talimatları

- Tüm çerçeve bileşenlerini ve plastik parçaları yalnızca hafif deterjanlar kullanarak temizleyin. (örneğin Sagrotan)
- Dolgu parçaları 40 ° C'de yıkanabilir. Bir çamaşır makinesinde yıkanırsa, keten torbaya veya yastık kılıfına koyun.
- Çoğu durumda, nemli bir bezle silmek yeterlidir- BINGO Evolution pusetinizi tuzlu suda kullanmayın.
- Kum veya diğer partiküllerin tekerlek yataklarına zarar vermesini önleyin- BINGO Evolution cihazınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede havluyla kurulayın
- Saç ve kir partikülleri genellikle tekerlek ve çatal arasında birikir. Bu, tekerleklerin düzgün bir şekilde dönmesini engelleyebilir. Tekerleri çıkarın ve hafif bir deterjan kullanarak çatal ve tekeri iyice temizleyin
- Arka tekerleklerde hızlı bırakma sistemi bulunur. Bu sistemi çalışır durumda tutmak için, hızlı açılan aksa veya aks mahfazasına kir yapışmamasına dikkat edin. Çabuk açılan aks ayrıca reçine içermeyen dikiş makinesi yağı ile düzenli olarak hafifçe yağlanmalıdır
- Özellikle tekerlekli sandalyeyi kullanmaya başlarken ve herhangi bir ayarlamadan sonra vida bağlantıları sık sık kontrol edilmelidir. Bir vidalı bağlantı tekrar tekrar gevşerse, satıcınıza danışın.

8.2 Çalışma ömrü BINGO Evolution

BINGO Evolution rehabilitasyon pusetinin kullanım ömrü, bakım ve bakım yoğunluğuna bağlı olarak 5 yıldır. Yetkili bir HOGGI satıcısı tarafından yıllık bir inceleme yapılmasını tavsiye ederiz. Bir parazit veya tekerlekli sandalyenin hasar görmesi durumunda derhal bir bayi veya tıbbi malzeme mağazası tarafından kontrol edilmelidir.

9 Özellikler

	Mini	Size 1
Koltuk genişliği	130 - 250 mm	180 - 300 mm
Koltuk derinliği	120 - 270 mm	160 - 340 mm
Uzay koltuğu ünitesini yatırın Sürüş yönünde Ters sürüş yönü	45° 45°	45° 45°
Arkalık yüksekliği	370 - 510 mm	450 - 630 mm
Sırt dayaması Sürüş yönünde Ters sürüş yönü	80° - 180° 80° - 180°	90° - 160° 90° - 160°
Alt bacak uzunluğu	160 - 340 mm	160 - 370 mm
Arka tekerlek çapı	290 x 60 mm 300 x 60 mm	290 x 60 mm 300 x 60 mm
Ön tekerlek çapı (sert / döner)	190 x 50 mm 200 x 48 mm	190 x 50 mm 200 x 48 mm
Yükleme kapasitesi * Koltuk ünitesi Mobilite tabanı	25 kg 60 kg	50 kg 60 kg
Ağırlık** Koltuk ünitesi Mobilite tabanı	6,4 kg 8,6 kg	6,4 kg 8,6 kg
Toplam uzunluk Maksimum En az	1015 mm 910 mm	1015 mm 910 mm
Toplam genişlik Maksimum En az	630 mm 620 mm	630 mm 620 mm
Yükseklik	1110 mm	1110 mm
En ağır parçanın ağırlığı (koltuk ünitesi)	8,6 kg	8,6 kg



DİKKAT!

*Aksesuarlar ve ilave parçalar yolcu için kalan yük kapasitesini orantılı olarak azaltır.



DİKKAT!

**Ağırlıklar temel konfigürasyondaki bir BINGO Evolution'a atıfta bulunur.

9 Özellikler

	Size 2	Size 2 XL
Koltuk genişliği	230 - 350 mm	230 - 350 mm
Koltuk derinliği	220 - 400 mm	300 - 450 mm
Uzay koltuğu ünitesini yatırın Sürüş yönünde Ters sürüş yönü	45° 45°	45° 45°
Arkalık yüksekliği	540 - 750 mm	620 - 830 mm
Sırt dayaması Sürüş yönünde Ters sürüş yönü	90° - 160° 90° - 160°	90° - 135° 90° - 135°
Alt bacak uzunluğu	160 - 400 mm	160 - 400 mm
Arka tekerlek çapı	290 x 60 mm 300 x 60 mm	290 x 60 mm 300 x 60 mm
Ön tekerlek çapı (sert / döner)	190 x 50 mm 200 x 48 mm	190 x 50 mm 200 x 48 mm
Yükleme kapasitesi* Koltuk ünitesi Mobilite tabanı	50 kg 60 kg	50 kg 60 kg
Ağırlık** Koltuk ünitesi Mobilite tabanı	7,4 kg 8,7 kg	7,4 kg 8,7 kg
Toplam uzunluk Maksimum En az	1015 mm 910 mm	1015 mm 910 mm
Toplam genişlik Maksimum En az	680 mm 670 mm	680 mm 670 mm
Yükseklik	1110 mm	1110 mm
En ağır parçanın ağırlığı (koltuk ünitesi)	8,7 kg	8,7 kg

HOGGI Ltd. Şti.
OSB Güldiken Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi No.16 • 40100 Kırşehir • Türkiye
Telefon: 0552 4298340
E-posta: info@hoggi.com.tr • **www.hoggi.com.tr**
