

HOGGI®



Cobra

Kullanım Kılavuzu

COBRA için kullanım kılavuzu

1	Ortak Bilgiler	
	1.1 Önsöz	
	1.2 Uygulama	2
	1.3 Uygunluk beyanı	2
	1.4 Garanti şartları	2
	1.5 Servis ve onarımlar	2
2	Güvenlik Talimatları	3
	2.2 Yaygın güvenlik talimatları	3
3	Teslimat ve kullanıma hazırlanmak	6
4	Ayarlama	6
	4.1 Castor lock	7
	4.2 Yükseklik ayarlaması	7
	4.3 Kaldırma gücünü ayarla	7
	4.4 Koltuk biriminin bağlanması ve ayrılması	8
	4.5 Kullanmadan önce statik kararlılığı kontrol	8
5	Bakım	9
6	Teknik veriler	9

1 Ortak Bilgiler

1.1 Önsöz

GAZ basınç yay ve 45 ° eğim ile **COBRA** kapalı taban seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu yüksek kaliteli ürünü hayatınızı daha güvenli ve kolay hale getirmek için tasarladık ve bu kılavuzu kullanmanıza ve bakımını nıza yardımcı olacak şekilde dahil ettik. Bu ürünü tavsiye edilen şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen aşağıdaki talimatları okuyun. Başka sorunuz varsa veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sağlık hizmeti sağlayıcınıza başvurun. COBRA'nın beklentilerinizi karşılamasını umuyoruz. Tasarım, kullanım için bu talimatlarda açıklandığı gibi, önceden haber verilmeden teknik değişikliklere tabidir.

1.2 Uygulama

COBRA, iç oda için yapılan kapalı taban özellikle BINGO Evolution koltuk ünitesi desteği ve / veya ortopedik koltuk sistemleri için geliştirilen ve optimize edilmiş bir bireysel ayarı için birden fazla ayarlanabilir. Uygun ayarlamalar essential ve ortopedik sırasıyla rehabilitasyon uzman dükkânı tarafından yapılmalıdır.

1.3 Uygunluk Beyanı

Hoggi GmbH, tek sorumluluğu olan üretici olarak **COBRA'nın** 93/42/EEC Yönergeleri'nin gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder.

1.4 Garanti

Garanti, yalnızca ürünün belirtilen koşullara ve amaçlanan amaçları için, üreticinin tüm tavsiyelerine uygun olarak kullanılması nda geçerlidir. Üretici, üretici tarafından onaylanmayan bileşenlerin ve yedek parçaların neden olduğu hasarlardan sorumlu değildir.

1.5 Servis ve Onarım

COBRA'daki servis ve onarımlar sadece yetkili **HOGGI** bayileri tarafından yapılmalıdır.

Herhangi bir sorun çıkarsa, lütfen **COBRA'nızı** sağlayan satıcıyla irtibat geçiniz.

Yetkili anlaşma cılar sadece orijinal **HOGGI** yedek parçalarına uygun.



Hazırlanması, onarımı ve servisi için aşağıdaki araçlar gereklidir:

Allen anahtarı, boyutu: 2,5 mm, 4 mm, 5 mm ve 8 mm

Vidalı anahtar, boyut: 10 mm ve 13 mm

Yetkili HOGGI bayiniz:

2 Güvenlik talimatları

2.1 Sembollerin anlamı



Dikkat!
Olası kaza ve yaralanma tehlikesi uyarısı. Olası teknik hasar uyarısı.



Bilgi!
Ürünün kullanımı hakkında.



Bilgi!
Servis personeli için.

Dikkat!
Kullanmadan önce kılavuzu okuyun!

2.2 Ortak güvenlik talimatları

Kullanmadan önce kılavuzu tamamen okuyun!

Kullanmadan önce ürünün kullanımı ve işlevleri hakkında bilgi edinin ve çeşitli işlevleri uygulayın.

Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu kılavuzun talimatlarına uymazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir. Yine de tüm olası koşullar ve öngörülemez durumlar bu kılavuzu kapsayabilir. Sebep, özen ve ihtiyat ürünün özellikleri değildir, ürünü kullanan kişilerin gerekli olması gerekir. Ürünü ve aksesuarlarını kullanan kişi tüm talimatları anlamalı ve ürünü ve aksesuarlarını kullanan herkese açıklamalıdır.

Talimatlar açık değilse ve daha fazla açıklama gerekli hale gelirse veya başka sorularınız varsa lütfen **HOGGI** bayiniz ile irtibata geçiniz.



Çocuğunuzun herhangi bir zamanda koltuk veya oturma sistemine bağlayın.



Kapalı çerçeve sadece düz zeminde kullanılmalıdır.



Buna göre **COBRA** kullanın.
Kapalı üs bir çocuk taşımak için planlanmaz. Tekerlekler, çocuğu bir masaya oturtmak için tasarlanmıştır.



Başka bir kişinin yardımı olmadan merdivenlerden inip gitmeyin. Rampa veya asansör gibi cihazlar varsa, lütfen bunları kullanın. Eğer mevcut değilse, o zaman bebek arabası iki kişi tarafından engel üzerinde taşınmalıdır.



Kapalı çerçeve ayrılmadan önce ve int o almadan önce koltuk veya oturma sistemi dışında, her zaman castor kilitleri kilitleyin.



Koltuk veya oturma sistemine girerken veya çıkarken ayak plakasının üzerinde durmayın.



Sadece iç taban katı bağlı parçalar tarafından kaldırın:
- taban çerçeve tüpü



Çocuğunuz önde, koltuk veya oturma sisteminin arkasındaki nesnelere ulaştığında, koltuktan veya oturma sisteminden çok fazla eğilmediğinden emin olun, çünkü gra vity'nin merkezindeki kayma koltuk veya oturma sistemi yle kapalı taban eğimveya devrilmeye neden olabilir.



Lütfen ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Plastik ambalaj boğulma tehlikesi sunar.



Çocuğunuzu asla koltukta veya g sisteminde koltuksuzbırakmayın, bağlı ve frenler devreye girse bile.



İtme kollarına ağır torbalar veya diğer ağırlıkların takılması stabiliteyi olumsuz etkileyebilir.



Kapalı taban ve koltuk veya oturma sistemi bir seferde sadece bir çocuk taşımak için tasarlanmıştır.



İç taban maksimum yük kapasitesi 50 kg (gövde ağırlığı dahil diğer yük).



Aksesuarlar ve eklentiler maksimum yükü orantılı olarak azaltır.



Adımları ve benzeri nesneleri dikkatli bir şekilde yere atın. Tekerlekler b1 ock olabilirve düşme riski var!



Koltuk kabuğunun montajına sadece belirtilen oturma alanı içinde izin verilir. Bu yeni ürün kombinasyonunun üreticisi, devreye almadan önce kararlılığı ve maksimum yükün yapışmasını test etmek zorundadır.



Dikkat!
Özellikle yaslanma ayarlama sırasında dikkate, uzay fonksiyonu ve ayak askısı açısı eğim esnek parçalar halinde kol veya bacaklar çıkıntılı tarafından çocuk için yakalanma tehlikesi.



Dikkat!
Aşırı kayış biter on aksesuarları eğim mekanizması içinde sıkışıp olabilir ve kilitleme pimleri devreye önlemek olabilir. Böyle bir durumda koltuk hareketlilik tabanından düşebilir. Onlar tuzağa olamaz böylece aksesuarları üzerinde aşırı kayış biter kısaltmak.
Koltuğu keskin bir şekilde öne çekerek koltuk ünitesinin düzgün bir şekilde devreye girdiğini kontrol edin. Kilitleme pimlerinin tamamen devrede olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse tamamen içeri itin.



Aşırı sıcaklıklarda dikkatli olun. Kapalı taban önemli ölçüde zaman güneşte veya sauna da ısınabilir. Aşırı soğukta hipotermi riski vardır.



Atıkların bertarafı: Metal, alüminyum ve plastik parçalara kadar ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm ulusal ve yasal şartlara göre çalıştırılmalıdır.



Herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde, gevşetilmiş vidaları sıkıca sıkılaştırdığınızdan emin olun.

3 Teslimat ve Kullanıma Hazırlık

Orijinal paket aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Taban çerçevesi
- Kunduz
- Kullanım kılavuzu
- Taşıma güvenlik maddelerini ve ambalaj malzemelerini dikkatlice çıkarın.

Castors monte etmek için follows olarak devam:

- Alttan taban çerçevesine tekerlekleri takın.
- Cıvata'yı bir vidalı anahtarla (boyut 13) sıkıca sıkın.
- Diğer 3 kasti düzeltmek için bu adımı tekrarlayın.



Cıvataları sıkıca sıkın.

- Castor kilidini kilitleyin (ayrıca bakınız 4.1).
- Lütfen kapalı üssün önünde durun.
- Fren kolu sağ elinizle etkinleştirin ve iç tabanı istenilen yüksekliğe yerleştirin (ayrıca bkz. 4.2).

4 Uyum ve Uyum Olanakları

COBRA sadece 75 mm'lik castorlarla donatılabilir.

4.1 Hint kilidi

- Castor kilidini kilitlemek için kilit paddel aşağı doğru baş aki ile basın.


- Castor kilidini açmak için kilit paddel kadar akik ile itin.





4.2 Yükseklik ayarı

- 4 kast kilidi ile kapalı tabanı güvenli (ayrıca 4.1 bakınız).
- Çocuğu tek elle sabitle.
- Fren kolu gösterildiği gibi etkinleştirin (6).
- Koltuk ünitesini istenilen konuma getirin.

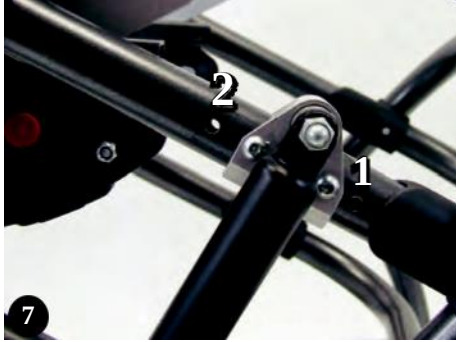

4.3 Kaldırma gücünün ayarlanması

COBRA müşterinin siparişine uygun olarak inşa edilmiştir. Teknisyenin kaldırma gücünü değiştirmesi mümkündür.

3 kaldırma gücü ayarlayıcısı seçilebilir:

- 20 kg'a kadar (bkz. işaret 1)
- 35 kg'a kadar (anında kurulum)
- 50 kg'a kadar (bkz. işaret 2)




4.4 Koltuk ünitesinin takılması ve ayrılması

Cobra'yı bir arabada taşımak veya ağırlığı nı

İki olay, bu sokak çerçevesinden koltuk ünitesi ayırmak kolaydır. Bingo Evolution koltuk ünitesini kapalı mobilite tabanında kullanmak istiyorsanız, bu da değerlidir.

- Koltuk ünitesini ayırmadan veya takmadan önce birlways, castor kilitlerini kilitleyerek bebek arabası nızı emniyete alabilirsiniz (ayrıca bkz. 4.1).
- Sırt dayamasını 90° konumda olduğundan emin olun. (Ayrıca bingo Evolution 4.9 sırt dayama kullanım kılavuzuna da bakınız).

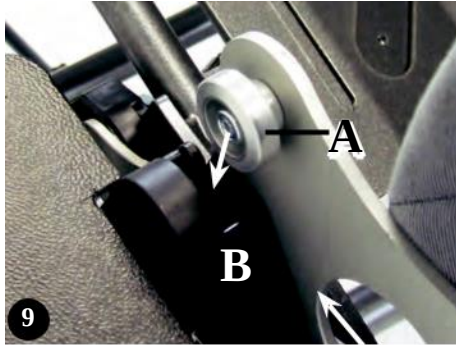

Ekleme:


- Koltuk ünitesini sırt dayama da ve ayak askısı (8) üzerinde yakalayın.
- Koltuk ünitesini konumlandırın, koltuğun yere dikey olarak durması. Koltuk ünitesini iç tabanüzerine takın ve kılavuz milinin (A) her iki taraftaki (eğim) braketini (B) içine kaydığınızdan emin olun.
- Kilitpimleri (tilt) tabanında (45° pozisyonda) duyulabilen devreye girene kadar koltuk ünitesini salıncak.
- Koltuk ünitesini ve arkalık yaslanmasını 4.17 ve 4.9 altında açıklandığı şekilde istenilen konuma getirin. BINGO Evolution kullanım kılavuzunda.



Ayırmak:

- Koltuk ünitesinin yanında durun.
- Uzay fonksiyonundaki (10) eğimin aktif tutamacını çekin ve kilitleme düğmesi koltuk braketinin plakası bitişik olana kadar koltuk ünitesini sallayın.

- Kilitleme düğmesine (A) basın ve koltuk ünitesini sallayın, koltuğun yere dikey olarak durması.
- Koltuk ünitesini ayrıca ayak askısı üzerinde yakalayın ve koltuk ünitesini kaldırın (12).

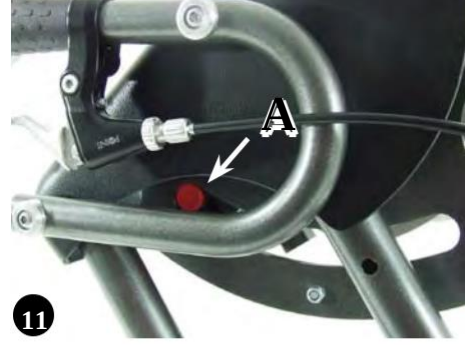

Dikkat!
Aksesuarlarda fazla kayış uçları
Eğim mekanizması ve nişan önlemek olabilir
Kilitleme pimleri. Böyle bir durumda koltuk düşebilir
Hareketlilik tabanı. Aksesuarlarda fazla kayış uçlarını kısıltma
Böylece tuzağa düşürülemezler.
Koltuğu keskin bir şekilde ileri çekerek kontrol edin
Birim düzgün bir şekilde devreye girer. Kilitleme pimlerinin
Tamamen meşgul. Gerekirse tamamen içeri itin.



4.5 Kullanmadan önce statik stabilitenin kontrol edilmesi

Daha sonra BINGO Evolution koltuk ünitesi nin oturma sistemleri ile **COBRA** kombinasyonu yetkili bir satıcı tarafından kullanılmadan önce statik stabilite açısından kontrol edilmelidir. Koltuk ünitesi ve kullanıcı dahil **COBRA** zemin ve caster seviyesi arasında 5° açıyla devrilmemelidir. Bu test her yönde ve tüm kritik ayarlamalarda yapılmalıdır, örneğin maksimum eğim.



Dikkat!
Eğim testini sadece başka bir kişinin yardımıyla gerçekleştirin.



5 Bakım

COBRA rehabilitasyon bebek arabası CE onaylıdır. İmalatçı, bu tıbbi ürünün bir bütün olarak 93/42/EEC Kılavuzu'nun gerekliliklerine uygun olduğunu garanti eder. Her kullanımdan önce iç taban doğru fonksiyon için kontrol edilmelidir. Aşağıdaki tabloda listelenen öğeler kullanıcı tarafından belirtilen aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu basit denetimlerin yapılmaması, garantiyi geçersiz kılacak sorunlara yol açabilir.

Kontrol	Günlük	Hafta -lık	Aylık
Castor kilidi işlev testi	X		
Vida bağlantılarının kontrolü		X	
Tekerlekler ve yataklar gibi aşınma parçalarının görsel denetimi			X
Rulmanlarda kontaminasyon			X

Herhangi bir kusur belirgin hale gelirse, bunları ortadan kaldırmak için yetkili **HOGGI** bayi ile irtibata geçiniz. Ayrıca, **COBRA'nızın** yetkili satıcınız tarafından her on iki ayda bir hizmete sayılı Anızı öneririz.



Temizlik ve bakım talimatları

- Tüm çerçeve bileşenlerini ve plastik parçaları sadece hafif deterjanlar kullanarak temizleyin.
- Çoğu durumda nemli bir bezle silme yeterlidir.
- Kum veya diğer parçacıkların tekerlek yataklarına zarar vermesini engelleyin.

6 Teknik Veriler

COBRA- gaz basınçlı spring ve 45 ° eğim ile kapalı taban

Koltuk/kaldırma yüksekliği	27- 61 cm arası
Toplam genişlik	62 cm
Toplam uzunluk	78 cm
Castor çapı	75 mm
Tilt	0° ila + 45°
Toplam ağırlık	11,3 kg
Yük kapasitesi iç taban	50 kg



Bilgi!

Aksesuarlar ve eklentiler yolcu için kalan yük kapasitesini orantılı olarak azaltır. Mobilite üsleri ve koltukları farklı yük kapasitelerine sahiptir.

Üretici:

Hoggi Ltd.Şti.

OSB Güldiken Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi No:16

Tr – 40100 Kırşehir

Fon: (+90) 272 / 12 24

e-posta: info@hoggi.com.tr · İnternet: www.hoggi.com.tr